



Modell 11-T Båre

Brukermanual

1. Tiltent bruk av modell 11-T båre

Ferno Model 11-T Båren er designet for å hjelpe til med transport av avdøde pasienter ved hjelp av et innovativt skinnesystem som gjør det enkelt å fjerne dem nedover trappene og ekstra kontroll.

Standardfunksjonene inkluderer:

- Robust og lett med to forhjul for enkel manøvrering
- Smal spor-til-bakkeklaring gir lettere manøvrerbarhet over alle underlag, selv med spor utplassert.
- Brettes i to for enkel lagring og bæring
- Ben bretter seg ut av veien når det ikke er behov for det
- Leveres med hurtigutløsende stropper
- Nå kommer komplett med fotstøtte

Hver bruker bør lese disse instruksjonene og øve på prosedyrene for bruk før de faktisk tar båren i bruk.

Sett regelmessige vedlikeholdsprosedyrer og ansvar for å sikre riktig vedlikehold som beskrevet i denne håndboken.

Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med båren i tilfelle overføring til nye eiere eller brukere.

2. Kontroll av modell 11-T bære

Før starten på hver dag anbefales det å gjøre følgende kontroller:

1. Har båren sikkert installerte begrensninger?
2. Sjekk dekselet for skader; Hvis noen blir funnet, må den byttes ut.
3. Forsikre deg om at benstolpene og hjulene foldes ut og låses på plass.
4. Kontroller at hengslemekanismen låses på plass.
5. Kontroller alle støpegods og bårerammer for sprekker eller skader.
6. Studer denne håndboken før bruk. Øv uten vekt til du er helt kompetent i å bruke båren.

Når disse kontrollene er fullført, er båren klar til bruk i vanlig tjeneste.

SIKKER ARBEIDSLAST
159 kg

Dette produktet må vedlikeholdes og vedlikeholdes regelmessig for å sikre tilfredsstillende drift.

Vi anbefaler at båren blir betjent med samme intervaller som bilen.

Regelmessig rengjøring hjelper til med å redusere risikoen for overføring av sykdom og gjør at utstyret kan fungere optimalt.

ADVARSEL

Fare for fangst kan ikke elimineres på grunn av bruken av dette produktet. EXTRA CARE skal tas mens du bretter og bretter ut båren.

3. Operasjons prosedyre

Generelle prinsipper

Alle personer som vil kontrollere bruken av denne båren, må sørge for at følgende prosedyrer overholdes:

1. Kontroller båren til enhver tid.
2. Hold kroppen sikker ved hjelp av begrensninger.
3. Bruk hjelp når det er nødvendig for å sikre operatørens sikkerhet.

Overføring til bære

- Brett ut båren.
- Sørg for at båren er helt utfoldet og låst på plass.
- Plasser båren ved siden av kroppen og åpne begrensningene.
- Overfør kroppen til båren ved hjelp av anerkjente prosedyrer.
- Lukk begrensningene rundt kroppen.
- Gjør justeringer etter behov.

Brukes i et kjøretøy

Når en kropp skal transporteres på båren i et kjøretøy, skal både den avdøde pasienten og båren plasseres på en vogn, bør vognens begrensninger festes rundt kroppen og båren for å forhindre bevegelse i alle retninger, og vognen skal festes til kjøretøyet ved hjelp av et godkjent feste.



Imidlertid, hvis pasienten / båren må plasseres på gulvet eller benken, må det sørges for å inneholde bevegelse under alle transportforhold som kjøretøyet er konstruert for å tåle. Festeordninger eller andre åpninger i bilens gulv alene er ikke nok til å sikre båren ordentlig. Ytterligere enheter som inneholder bevegelse av denne typen, er brukeren av ambulanseprodusenten som har ansvaret for å designe, teste og installere.

Bretter ut og bretter båren.

Bretter ut:


Båren brettes fra ende til annen. Ta tak i rammen og brett / fold ut som vist og brett ut fotstøtten. Båren låses automatisk på plass.

Beina og hjulene kan brettes ved å trykke inn låseknappen, og deretter brette benet / hjulet innover til låseknappen går i inngrep, og låse benet eller hjulet på plass.

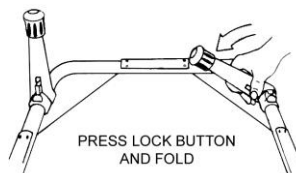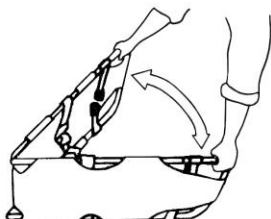

Bretting:

For å brette båren for lagring eller transport, klem de to låsene sammen i en klemmende handling. Fangstene er plassert på undersiden av båren som vist i fig. A og B

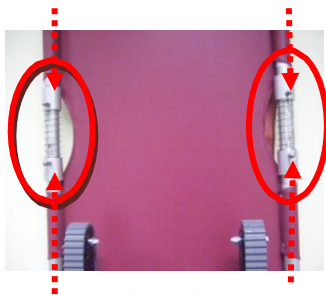

Figur A



Figur B

Båren vil nå brettes. (Som vist i figurene C, D, E). Brett fotstøtten vekk.



Figur C



Figur D



Figur E

Å bære båren over ulendt eller ujevnt underlag

Deltakere bør løfte båren ved å ta tak i bårerammen i hjørnene. En ledsager i hver ende kan ofte bære kroppen og båren over korte avstander over jevne overflater. Ekstrem vekt, langdistanse eller ulendt terreng kan øke antall ledsagere som kreves for sikker bevegelse.

Begrensninger

Hver bære er utstyrt med tre fastholdelsesstropper som skal brukes til enhver tid. Hver stropp har løkker slik at de lett kan festes til bårerammen. Spenn stroppene over brystet, lårene og ankene for å sikre kroppen.

Manøvrering av båren

Når du manøvrerer båren Model 11 på flat mark, må sporet være i oppbevart posisjon. For å lagre sporet trykker du ned spaken på undersiden av båren til sporet er flatt mot båren. (Figur 1)

For å trille båren, løft båren til hjulene på undersiden av båten er i kontakt med bakken. Mens du ruller båren i denne posisjonen, må du alltid være oppmerksom på eventuelle hindringer som kan være på bakken. (Fig. 2)

Øv deg på å styre og flytte båren med en før du tar enheten i bruk.



Figur 1




Figur 2

Manøvrerer båren ned trappene

For å åpne sporet for anstendige trapper, hold båren oppreist og plasser foten på sporet på sporet, skyv nedover til sporet låses på plass. (Fig. 3)

Plasser båren på toppen av trappen med sporet som hviler på det øverste trinnet, og sakte ned trappene på en kontrollert måte, og hold sporet i kontakt med trappene. (Fig. 4, 5, 6) Ferno UK Ltd anbefaler at det kan være behov for to operatører for tunge laster.

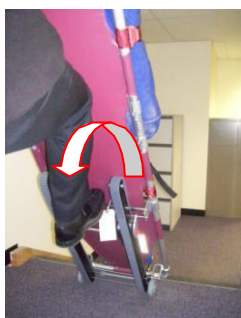


Figur 3



Figur 4



Figur 5

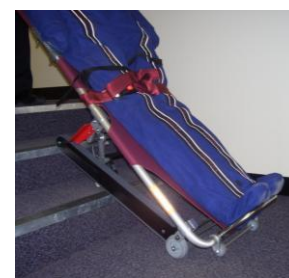

Figur 6


For å snu båren på en landing eller i bunnen av trappen, løft båren slik at den hviler på de to hjulene som er plassert foran på båren. Når du holder på rammen til båren, vil du nå kunne dreie båren i den retningen du trenger i et trangt rom. (Fig. 7, 8, 9). Fortsett med transporten.



Figur 7



Figur 8

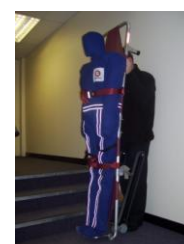

Figur 9

5. Rengjøring og smøring

Rengjøring

Regelmessig rengjøring bidrar til å redusere risikoen for overføring av sykdom og gjør at utstyret fungerer som det skal.

Damprensing med et passende rengjøringsadditiv er den mest effektive metoden. De samme resultatene kan oppnås ved å bruke en svamp og mildt vaskemiddel såpe blandet i varmt vann. I spesielt skitne tilfeller, spesielt hvis båren har vært lagret i lang tid, kan det være nødvendig å vaske båren først med løsemiddel fuktet på fille før du bruker såpe og vann.

Når den er rengjort, tørk båren med et mykt håndkle, og vær spesielt oppmerksom på svingbare og glidende skjøter. Hvis en trykkluftslange er tilgjengelig, kan du oppdage at trykkluftsstråler er mer effektive når det gjelder å tørke de vanskelig tilgjengelige stedene. Når båren er tørr, kan det være lurt å bruke en flytende bilvoks på polerte overflater.

Smøring

Model 11-T Båren din fungerer effektivt og trygt bare når den er godt smurt. Du MÅ smøre alle bevegelige og glidende deler etter hver inspeksjon eller forebyggende vedlikeholdsprogram, eller hvis det er utilstrekkelig smøring for at de bevegelige delene skal fungere enkelt og stille.

Generelt sett kan nesten alle glidende og bevegelige deler smøres med et lett fett. En penetrerende væskesmøring brukes på noen glidende deler av båren. Når et penetrerende væskesmøremiddel brukes, MÅ imidlertid alt overskudd tørkes bort, for å forhindre opphopning av støv eller smuss som kan tette arbeidsdeler og hindre bevegelse.

Alternativt kan du kontakte Ferno (UK) Ltd Fieldcare Department på adressen på side 6 i denne håndboken.

6. Garanti og service

Fernos standard vilkår og betingelser gjelder for alt salg. En kopi er tilgjengelig på forespørsel. Disse inneholder fulle detaljer om garantibetingelser og begrenser ikke kundens lovbestemte rettigheter.

For service, vedlikehold og spørsmål angående dette eller andre Ferno-produkter, vennligst kontakt:

Ferno (UK) Limited
Ferno House
Stubs Beck Lane
Cleckheaton
West Yorkshire
England
BD19 4TZ

Telefon: +44 (0) 1274 851999

Faks: +44 (0) 1274 851111

eller din lokale distributør.

Dato	Service By	Merknader

7. Tekniske data

Produktnavn:	Modell 11-T Båre
Total Lengde:	1915 mm
Total Bredder:	490 mm
Lengde brettet:	920 mm
Dybde brettet:	215 mm
Høyde:	180 mm
Vekt:	10,5 kg
Vektgrense:	159 kg
Bygningsmaterialer:	Slange av aluminium Aluminium støpegods UV-stabilisert flammebestandig polypropylen

Registrert kontor:

Ferno (UK) Limited

Ferno House, Stubs Beck Lane, Cleckheaton, West Yorkshire, England. BD19 4TZ

Tlf: + 44 (0) 1274 851999 Faks: + 44 (0) 1274 851111

e-post: service.uk@ferno.com

Registrert nummer: 1007475 England

Ettersom vår policy er en kontinuerlig utvikling, forbeholder Ferno (UK) Ltd seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.

Aksjekode: 2003-0129



CE-merket på dette produktet viser samsvar med kravene i direktiv Annex IV + Annex VIII of MDR 2017/745 for medisinsk utstyr.