

ITC-HL Låsesystem for kuvøse

Rel.260717 engelsk



*Les denne brukermanualen
nøye og oppbevar den
for fremtidig referanse*

Ferno teknisk støtte

Kundeservice og teknisk støtte er viktige aspekter ved hvert Ferno-produkt. Før du kontakter oss, noter serienummeret til produktet og spesifiser det i all skriftlig kommunikasjon. For alle spørsmål angående teknisk støtte, kontakt Ferno Washington Italia srl:

Telefon (gratis i Italia)	800.501.711
Faks	+ 39 0516861508
E-post	info@ferno.it


Ferno kundeservice

For assistanse og ytterligere informasjon, kontakt Ferno Washington Italia srls kundeservice:

PRODUSENT


Ferno Washington Italia srl, Via Benedetto Zallone 26
40066 - Pieve di Cento (BO) - ITALIA

Telefon (gratis i Italia)	800.501.711
Telefon	+ 39 0516860028
Faks	+ 39 0516861508
Nettsted	www.ferno.it

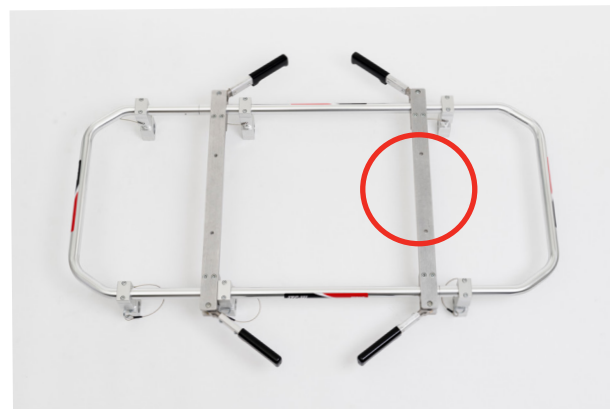

Serienummer: _____

Plassering: Hovedetikett plassert på låseanordningens øvre stang.

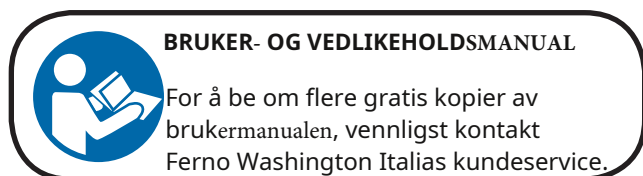

Ansvarsbegrensning

Denne brukermanualen inneholder generelle instruksjoner om bruk og vedlikehold av produktet. Instruksjonene dekker ikke alle mulige bruksområder og operasjoner. Brukeren er alene ansvarlig for riktig og sikker bruk av produktet. Sikkerhetsinformasjonen leveres som en tjeneste til brukeren og sikrer kun det minste nødvendige sikkerhetsnivået for å forhindre skade på operatører og pasienter. Ethvert annet sikkerhetstiltak iverksatt av brukeren må være i samsvar med gjeldende forskrifter. Før du bruker produktet, anbefales det på det sterkeste at personalet får opplæring i riktig bruk. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig referanse. Ved eierskifte, sørg for at bruksanvisningen følger med produktet. Ytterligere gratis kopier kan fås fra Ferno Washington Italias kundeservice.

Immaterielle rettighetserklæring

Informasjonen i denne brukermanualen tilhører Ferno Washington Italia srl - Via Benedetto Zallone 26, 40066 Pieve di Cento (Bologna) Italia.

Alle patentrettigheter, designrettigheter, konstruksjon, reproduksjon, bruk og salg knyttet til ethvert element som dekkes i denne håndboken er den konfidensielle og eksklusive eiendommen til Ferno Washington Italia srl, bortsett fra rettigheter som uttrykkelig er overført til tredjeparter eller som ikke kan tilskrives parter som eies av leverandør. Det er forbudt å reproducere denne håndboken, enten helt eller delvis, uten forhåndssamtykke fra Ferno Washington Italia srl

Begrenset garanti

Ferno-produkter er dekket av en 24-måneders garanti mot produksjonsfeil. For fullstendige vilkår og betingelser for garanti og ansvar, se kapittel *Garanti*

SIKKERHETSINFORMASJON

Les denne brukermanualen nøye. Den er en integrert del av enheten og må alltid oppbevares lett tilgjengelig. For din personlige sikkerhet og for pasientens sikkerhet, vær oppmerksom på følgende punkter:

Før hver bruk, sørg for at det ikke er tegn på slitasje, skade og/eller funksjonsfeil. Se avsnittet *Undersøkelse*. For å unngå infeksjoner og/eller bakteriell forurensning, følg det som er angitt i avsnitt 5.2 og 5.3, *Desinfeksjon* og *Rengjøring*.

Advarsel

Faresymbolene gjør oppmerksom på potensielt farlige situasjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til ulykker, skader og/eller personskader.



ADVARSEL

Feil bruk av låseanordningen kan forårsake skade og/eller personskade. Installer og bruk låseanordningen som beskrevet i denne brukermanualen

Uautoriserte modifikasjoner av låseanordningen kan forårsake alvorlig skade, personskade og/eller uforutsette driftsproblemer. Ikke modifier eller modifier låseanordningen på noen måte.

Enhver skade på komponentene til låseanordningen eller på hele systemet kan påvirke ytelsen og sikkerheten. Inspiser låseanordningen ofte, spesielt før og etter hver bruk. Sett låseanordningen ut av drift hvis den viser tegn på slitasje eller skade.

Feil vedlikehold kan forårsake alvorlige ulykker og/eller skader. Utfør vedlikehold som instruert i denne brukermanualen.

Bruk av upassende og/eller uautoriserte enheter kan forårsake ulykker, skade og/eller personskade. Bruk kun enheter som er godkjent og autorisert av Ferno Washington Italia.

Uautoriserte reparasjoner og reparasjoner utført av teknikere som ikke er autorisert av Ferno Washington Italia, vil gjøre alle garantier ugyldige og kan kompromittere sikkerheten til baren.

Uoriginale reservedeler og mangelfulle reparasjoner kan forårsake skade og/eller personskade. Bruk kun originale Ferno-deler og henvend deg kun til Ferno Washington Italias kundeservice.

Viktig

Bokser merket "Viktig" inneholder viktig informasjon om bruk og/eller vedlikehold av enheten.

Viktig

Blodbårne sykdommer

For å redusere risikoen for eksponering for smittsomme sykdommer som kan overføres med blod, som HIV-1 eller hepatitt, følg instruksjonene om desinfeksjon og rengjøring i denne brukermanualen nøye.

Kompatibilitet

ITC-HL-systemet er kompatibelt med FERNO-bårer av Proflexx 26B og 35P, 35A, 5126, 5126EL, 26S, Mondial, INX-serien og med intrahospital transportør 147. Det tillater å feste inkubatorer med en totalvekt på ikke over 140 kg, inkludert tilbehør, og kompatibel med de 4 forankringene (se diagrammet i seksjon 4.1 av del "A"), med senteravstand på 218 mm x 525 mm (sistnevnte senteravstand kan endres litt ved å flytte de to inkubatorstøttestengene, vær oppmerksom på å alltid balansere vekten av kuvøsen riktig på ITC-HL-rammen).

Ferno Washington anbefaler å bruke Ferno-bårer utelukkende med Ferno-låseanordninger, og å bruke Ferno-låseanordninger utelukkende med Ferno-bårer.

Ordliste over symboler

Symbolene som brukes i denne brukermanualen og/eller på låseanordningens etiketter er definert nedenfor. CE-merket finnes på låseanordningen og i denne brukermanualen.



Les brukermanualen
nøye



Dette produktet møter
Den Europeiske Union
Standarder

Etiketter og produktidentifikasjon

Les nøye og følg brukermanualen; erstatte skadet eller slitt etikett umiddelbart. For å få erstatningsetiketter, kontakt Ferno Washington Italias kundeservice.

ITC-HL-systemet identifiseres med delenummeret (PN) og serienummeret (SN) som er permanent trykt på etiketten på produktet.

CE-samsvar

DIREKTIV FOR MEDISINSK UTSTYR

Fernos produkter oppfyller kravene i det europeiske direktivet 93/42/EEC angående medisinsk utstyr. Låseenheten er en klasse I-enhet.

ITC-HL-systemet er designet og produsert av Ferno Washington Italia i samsvar med sikkerhetskravene gitt i direktiv 93/42/EEC (klasse I) om medisinsk utstyr og sertifisert i henhold til standard EN1789 for medisinske kjøretøy og utstyr (test). rapport "10G" nr. 0139\ME\PCA\08 av 23/01/2009).

Alle materialer som brukes, riktig dimensjonert for å fungere riktig innenfor belastningsgrensene som fremgår av de tekniske spesifikasjonene, er flammebestandige, frigjør ikke giftige eller forurensende stoffer, og er beskyttet for å sikre høy motstand mot slitasje og korrosjon.



ITC-HL RAMME

Beskrivelse

ITC-HL-systemet består av en ramme og et sett med seks hurtigforankringer. Denne enheten, i tillegg til kuvøsen, muliggjør en sikker transport av nyfødte i henhold til gjeldende regelverk. Hvis det er avtalt med de ekstra spesifikke blokkene (kode 082-1942/ITC-HL), ITC-HL-systemet kan byttes ut med forskjellige Ferno-bårer og intrahospitale transportører. Utvekslingsmanøveren er rask, sikker og gjort enkel med 4 ekstra løftehåndtak. Bårer med 6-pinners fester i Proflexx-serien kan utstyres med tilbehør for bariatriske pasienter og fortsatt brukes til alle standardbruk.

ITC-HL-systemet er kompatibelt med:

- Serie 26S - 26P - 26B;
- Serie 5126 EL, Custom M;
- Serie Mondial
- Serie 35
- Series Inx

Egenskaper


- Høy motstandsramme i aluminiumslegering.
- 6-pins feste med hurtigkobling.
- 4 løftehåndtak.
- Maksimal lastekapasitet: 140 kg.



ADVARSEL

Forankringssystemer/blokker må kun monteres av opplærte og kvalifiserte Ferno-operatører. Alle skruer må også strammes riktig, med den gjengede delen fuktet med middels gjengelås.

Komponenter (låsing)

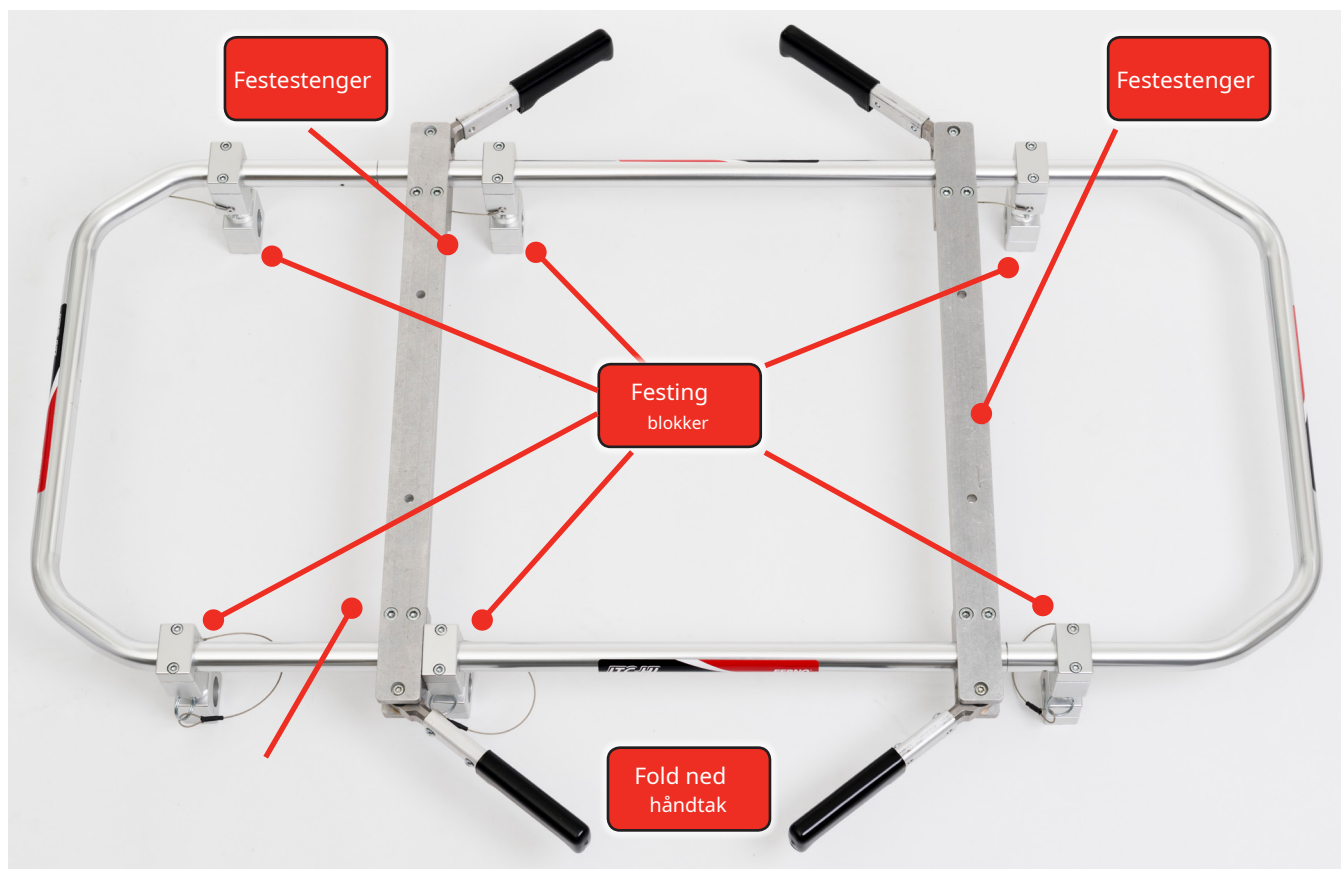

Tekniske data

Følgende tall er rundet av til nærmeste hele tall. For ytterligere detaljer, vennligst kontakt Ferno Washington Italia kundeservice. Ferno forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.

Størrelse uten kuvøse:

Lengde	120 cm
Bredde	62 cm
Maksimal bredde (med åpne håndtak)	103 cm
Høyde	13,5 cm
Vekt	10 kg

ADVARSEL

Forankringssystemer/blokker må kun monteres av opplærte og kvalifiserte operatører. Alle skruer må også strammes riktig, med den gjengede delen fuktet med middels gjengelås.

OPERATØRTRENING OG FERDIGHETER

Operatørens ferdigheter

Operatører som er autorisert til å bruke låsesystemet må:

- kjenne prosedyrene for å flytte pasienten;
- kunne hjelpe pasienten;
- har forstått prosedyrene beskrevet i denne brukermanualen;
- har deltatt på et passende kurs i riktig bruk av enheten;
- kjenne til enheten, dens funksjoner og alt tilbehør som brukes.

Opplæring

For riktig trening er det nødvendig å:

- les denne brukermanualen nøye (for ytterligere kopier kontakt kundeservicen til Ferno Washington Italia srl);
- delta på et kurs for sikker og riktig bruk av låsesystemet;
- øv med ITC-HL-enheten og dens tilbehør

før du bruker den i virkelige situasjoner;

- registrer nøye treningsøktene utført med låsesystemet på skjemaet som er vedlagt denne manualen "Treningsjournal".

Operatørens kunnskap

- Operatører må kunne ivareta sikkerheten til både seg selv og sine pasienter mens de bruker produktet. Operatører må trygt kunne bruke enheten og alle komponentene i systemet.

BESKRIVELSE AV ITC-HL LÅSESYSTEMET

Generell informasjon

ITC-HL-enheten er et låsesystem for inkubatorer som skal installeres på hovedrammen til bårerne. Den leveres i ulike konfigurasjoner slik at den kan tilpasses flere bårer og lastesystemer.

De tilgjengelige modellene er følgende:

- ITC-HL (for 26-S, 26P, 26-B bårer, serie 5026 og 5126 CUSTOM-M, 35A, 35P og transportør 147);
- ITC-HL-INX (for INX-båre og Mondial Monobloc)
- ITC-HL-BML (for Mondial med liten båre)

Fraskrivelse av ansvar for ITC-HL låsesystem

ITC-HL-låsesystemet, i de tilgjengelige konfigurasjonene, er kun utformet for bruk med bårer og transportører oppført i avsnittet "Generell informasjon". Det gis ingen garanti på tilpasningsevnen til ITC-HL-låsesystemet med andre transportører eller bårer enn de som er angitt. For garantibetingelser, se avsnittet "Garanti".

ADVARSEL

Feil bruk av ITC-HL-låsesystemet kan forårsake skade og/eller personskade. Bruk låsesystemet i henhold til tiltenkt bruk som beskrevet i denne brukermanualen.

_____ Et låsesystem som er satt sammen på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene i denne brukermanualen, kan forårsake alvorlige ulykker, skader og/eller skader på operatører og/eller pasienter.

INSTALLASJON

Installasjon av låseanordning

ITC-HL-rammen leveres allerede montert med alle 6 blokkene som vist i diagrammet under; mindre justeringer av blokkenes plassering kan være nødvendig dersom de forskjellige bårene ikke er perfekt utskiftbare.

For enhver installasjon av ITC-HL-systemon Ferno-bårene, kontakt Ferno Washington Italia srl kundeservice.

Hensyn til kjøretøyet


Hvis låsesystemet er montert på ambulanssegulvet, sørg for at det ikke er installert i samsvar med oksygen- og drivstoffledningene eller at det under installasjonen ikke er hull i kjøretøyets strukturelle deler.

Inkluderte deler

1. Alle tilgjengelige modeller er utstyrt med ITC-HL-låsesystem og forankring foran.
2. Se "Beskrivelse av ITC-HL-låsesystemet".

ITC-HL system forankring

1. Fjern båremadrassen for å utføre denne operasjonen.
2. Fjern sikkerhetsbøylene
3. Plasser de 6 "blokkene" uten å stramme dem helt
4. Plasser ITC-HL-systemet slik at det er sentrert og får blokkene til å matche
5. Fest de 6 "blokkene" med "pinne"-systemet
6. Stram helt til med en passende skiftenøkkel

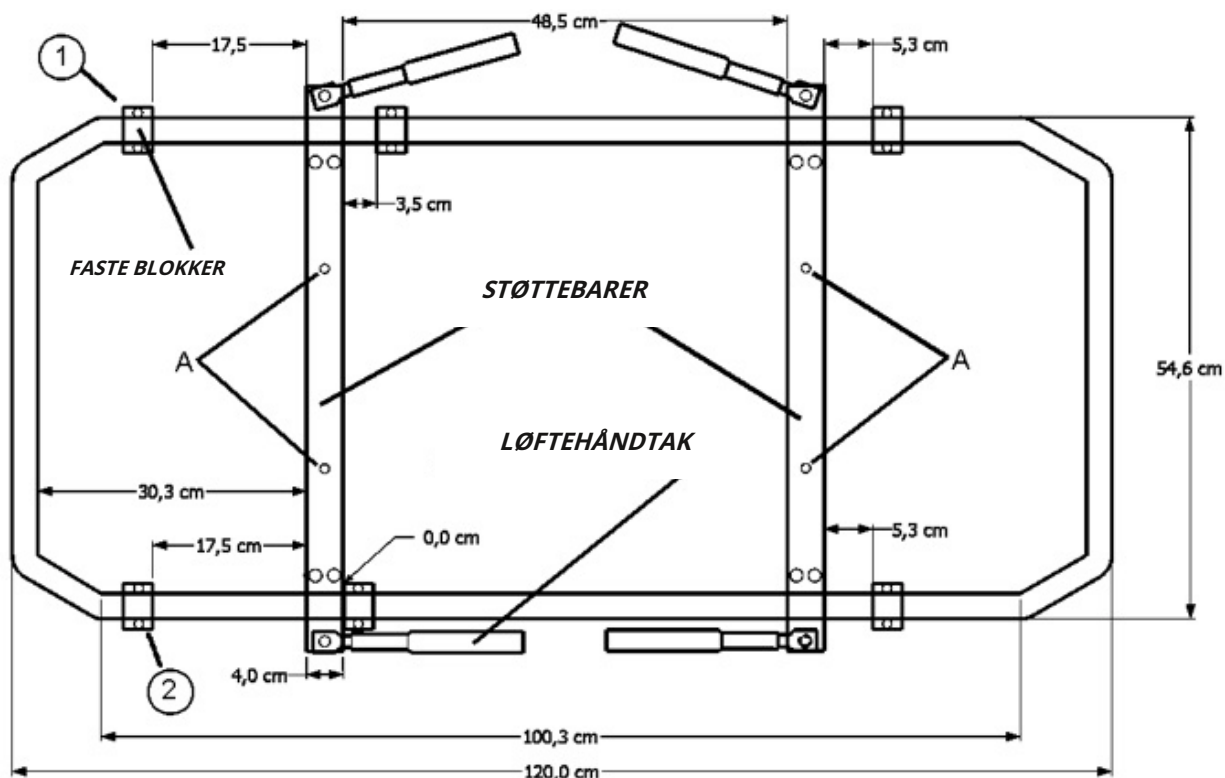

ADVARSEL

Følg dette monteringskjemaet for å sikre utskiftbarhet mellom de forskjellige FERNO-bårene. Forankringssystemer/blokker må kun monteres av opplærte og kvalifiserte operatører. Alle skruer må også strammes riktig, med den gjengede delen påsmurt med middels type gjengelås.

Monteringsdetaljer

For å sette sammen roterende blokker, plasser plastavstandsstykkene (kode 2042729) på rammen, åpne dem tilstrekkelig (figur 1); fortsett deretter å låse dem definitivt på plass ved hjelp av den nedre delen av blokken og de to respektive sekskantskruene (figur 4). Kontroller at alle de roterende blokkene har pinnen på linje med de relevante setene på de faste blokkene på ITC-HL-rammen.

Komponenter


For ITC-HL-system, serie 26/5126/35



Figur 1: Montering av plastavstandsstykke (kode 2042729).



Figur 2: Detalj av den roterende blokken (hann) med stift til monteres på de ulike bårene.

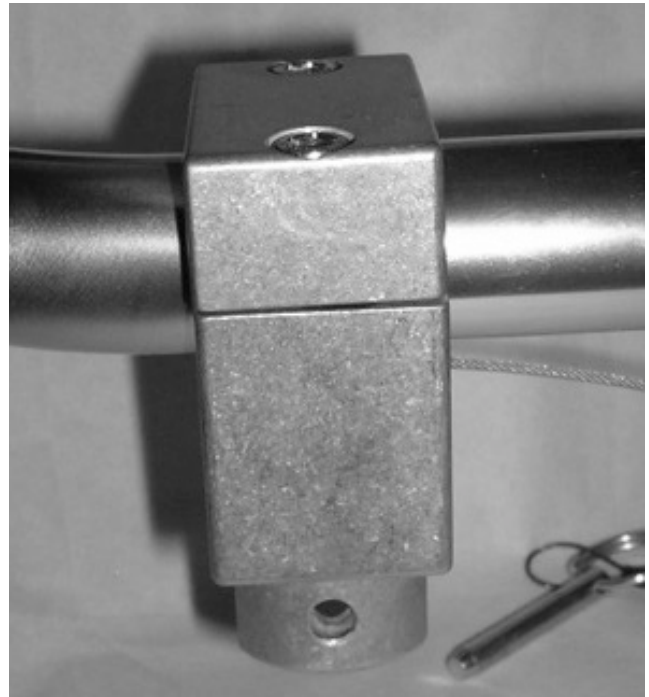

Figur 3: Detalj av den faste blokken (Hunn) installert på ITC-HL-rammen.




Figur 4: Montering av fast blokk på ITC-HL ramme.



Figur 5: Montering av roterende blokk på bære.



Figur 6 Detalj av sikkerhetspinne som skal fjernes når ITC-HL rammen skal skilles fra bære

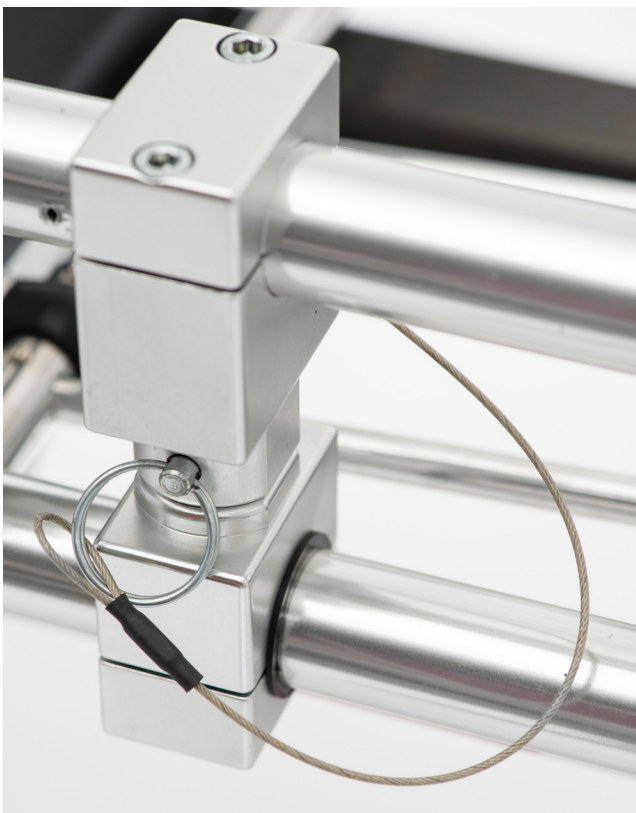

Figur 7: Kobling av faste og roterende blokker med sikkerhetspinne.



Figur 8: Figur 8: Løftehåndtak ÅPEN.



Figur 9: Løftehåndtak STENGT.

Bruk av ITC-HL-systemet krever minimum fire opplærte operatører. For å fjerne ITC-HL-systemet med kuvøse, fjern alle sikkerhetspinnene som holder forankringsblokkene mellom ITC-HL-rammen og båren sammen (se figur 6 og figur 7), åpne de fire løftehåndtakene (se figur 8), og løft ITC-HL-rammen med kuvøsen, hold den parallelt med bakken. Sett alltid håndtakene tilbake i startposisjon når du kobler systemet til båren igjen, som vist i figur 9. Hvis tappene på klossene festet til båren kommer i veien, kan de enkelt dreies 180°.

MERK: Løs en av de to festeskruene litt hvis blokken ikke lett kan flyttes, som vist i figur 10.



Figur 10

⚠ ADVARSEL

Installasjonen av kuvøsen må utføres utelukkende av personell som er autorisert og sertifisert av produsenten.

⚠ ADVARSEL

For montering av forankringsblokkene, skru skruene helt inn med en 5 mm sekskantnøkkel, som angitt i figurene nedenfor.

Installasjon av kuvøse

Kuvøsen forankres til ITC-HL-rammen i henhold til produsentens retningslinjer, ved hjelp av de 4 forankringene som er gitt på ITC-HL-rammen, som har følgende senteravstander, 218 mm og ca. 525 mm (sistnevnte senteravstand kan endres litt ved å flytte de to stengene som støtter kuvøsen, for å sikre at inkubatorvekten er riktig balansert på ITC-HL-rammen). Inkubatorrammen skal forsynes med hull med diameter lik 13 mm, med samme senteravstand til forankringene nevnt ovenfor.

Hvis det er nødvendig å tilpasse senteravstanden til forankringene til ITC-HL-rammen med de til inkubatorene, løsne litt på de 12 skruene på klemmene som holder de to brakettene som støtter kuvøsen på ITC-HL-rammen. Flytt de to brakettene symmetrisk for å balansere vekten og stram skruene på hver brakett helt.


ADVARSEL

Bruk alltid trådlås når det er angitt i denne brukermanualen.

Følg installasjonsinstruksjonene i denne brukermanualen, som følger med produktet, for å garantere at sikkerhetskravene oppfylles. Samsvarserklæringen for låsesystemet utgitt av Ferno Washington Italia gjelder produktet som er installert i samsvar med de riktige installasjonsinstruksjonene; Ferno Washing Italia vil ikke holdes ansvarlig for feil installasjon.

INSTALLASJON AV ITC-HL RAMME PÅ FERNO 5126 / 5126EL BÅRE

Advarsel: for å montere ITC-HL-systemet på bærer i 5126-serien, lag et spor i ABS-senterpanelet med en kutter eller liten sag for å feste de relevante blokkene på rammen, som vist med de to RØDE pilene i figur 13.

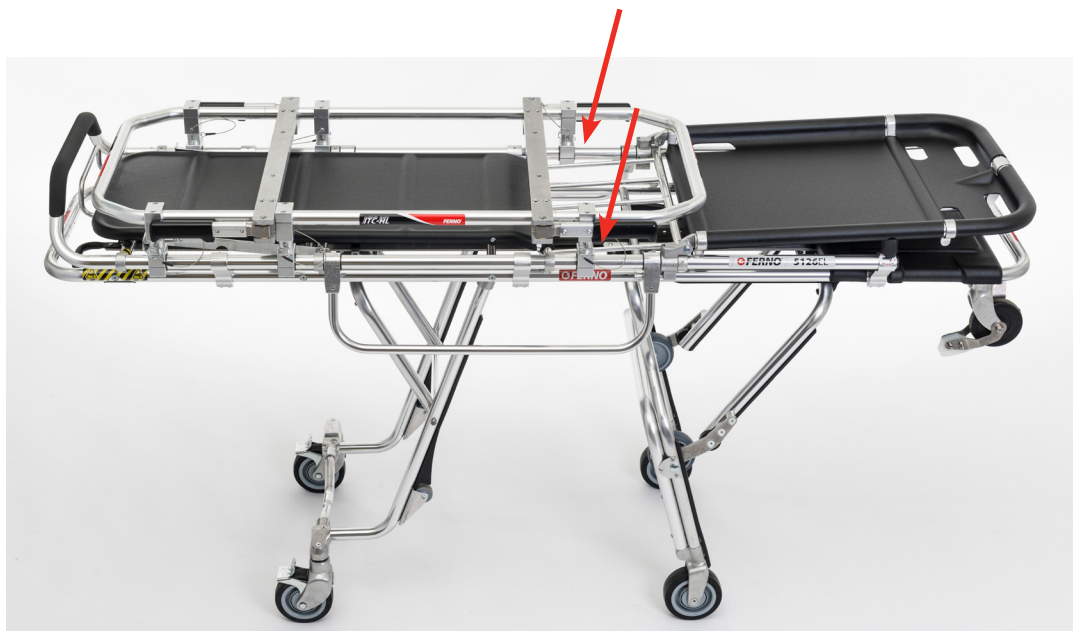

Figur 13: Montering av ITC-HL-ramme på Ferno 5126 og 5126EL Båre.

INSTALLASJON AV ITC-HL RAMME PÅ FERNO 35A OG 36 PROFLEXX BÅRE

Advarsel: For å sikre utskiftbarhet av ITC-HL-systemet med andre Ferno-bårer, fjern den mobile ryggstøtten på båren.



Figur 14: Montering av ITC-HL ramme på Ferno 35A Båre.



Figur 15: Montering av ITC-HL-ramme på Ferno 35P Proflexx Båre.

INSTALLASJON AV ITC-HL-RAMME PÅ FERNO 26S - 26 B BÅRE

Advarsel: For å sikre utskiftbarhet av ITC-HL-systemet med andre Ferno-bårer, fjern den mobile ryggstøtten på båren.




**Figur 16: Installasjon av ITC-HL-ramme på Ferno 26 P - 26 B
Båre.**

INSTALLASJON AV ITC-HL RAMME PÅ FERNO MONDIAL MED LITEN BÅRE OG MONDIAL MONOBLOCK BÅRE

Advarsel: For å sikre utskiftbarhet av ITC-HL-systemet med andre Ferno-bårer kan det være nødvendig å fjerne den mobile ryggstøtten på båren.





Kobling av faste og roterende blokker med sikkerhetspinne for Mondial

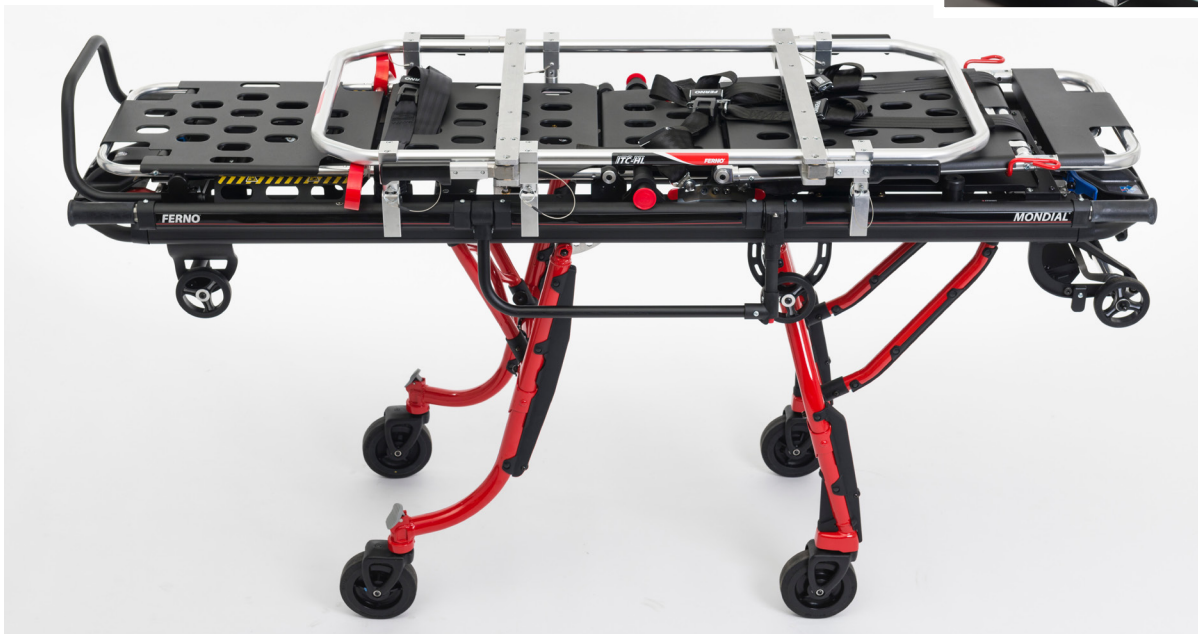

Figur 17: Installasjon av ITC-HL-ramme på Ferno Mondial Monobloc Båre


INSTALLASJON AV ITC-HL RAMME PÅ FERNO IN/X BÅRE

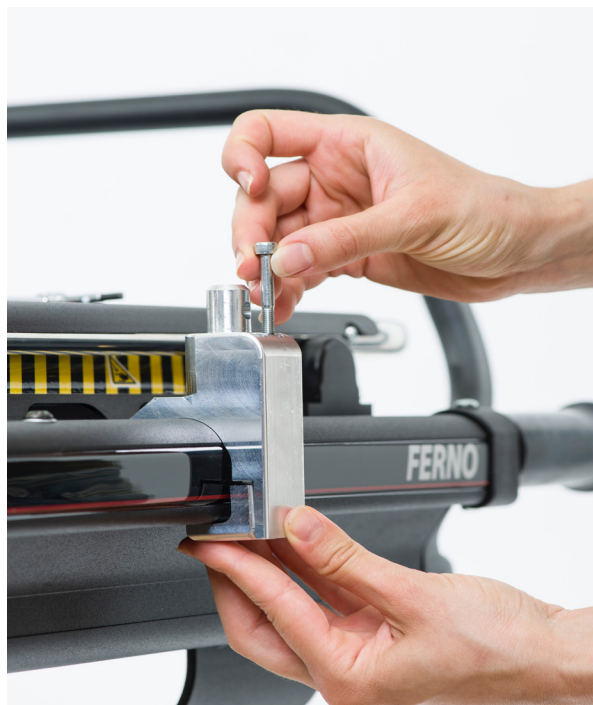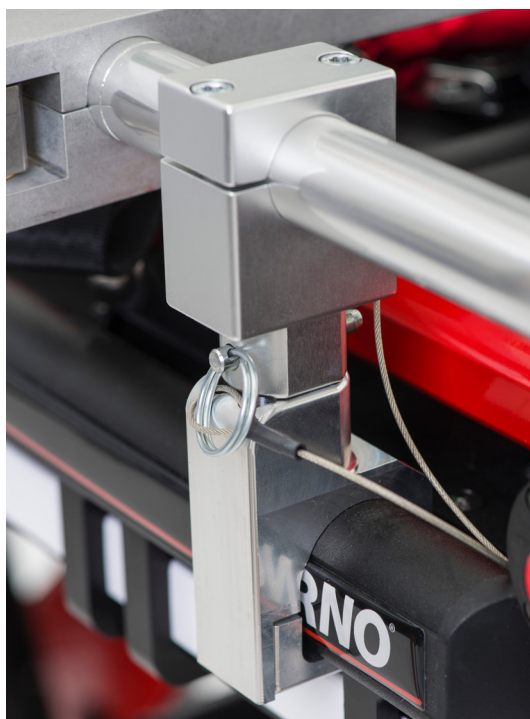

Kobling av faste og roterende blokker med sikkerhetspinner for Mondial monobloc og IN/x

INSTALLASJON AV ITC-HL RAMME PÅ FERNO INTRASYKEHUS TRANSPORTØR 147

Advarsel: For å sikre utskiftbarhet av ITC-HL-systemet med andre Ferno-bårer, fjern den mobile ryggstøtten på bære.

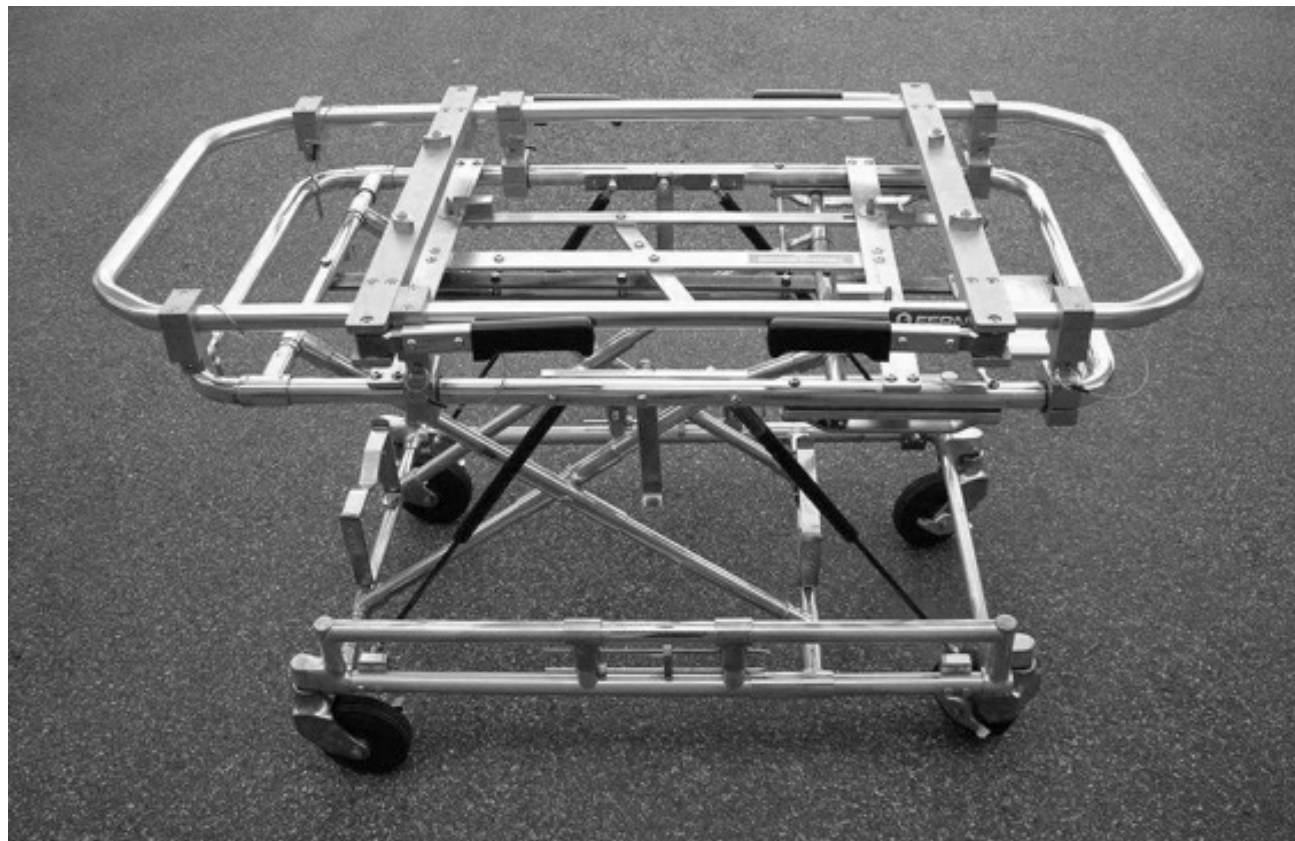

Sikkerhetsteknisk sjekk

For å garantere sikkerheten til enheten og dens operatører, må ITC-HL-systemet gjennomgå en teknisk sikkerhetskontroll av teknisk personell eller et autorisert Ferno-servicesenter hvert annet år. Kontakt Ferno Washington Italia kundeservice for å sette en dato for sjekken. Sjekk en gang i året eller mer ved kraftig eller svært hyppig bruk, eller bruk under uvanlige forhold. For enhver tvil eller for ytterligere avklaringer, kontakt Ferno Washington Italia kundeservice.

La vedlikeholdspersonalet utføre instruksjonene i brukermanualen.

- Kontroller at alle komponenter er tilstede.
- Kontroller at alle skruer, muttere, bolter, nagler og fjærstifter er riktig plassert.
- Kontroller at alle mobile deler beveger seg normalt og riktig.
- Kontroller at systemet ikke har slitte deler.
- Kontroller at alle forankringssystemer er riktig tilkoblet.
- Kontroller at alle forankringsblokker er godt festet til ITC-HL og bårerammene.
- Kontroller at kuvøsen er godt festet til ITC-HL-rammen og at alle festeskruer er tilstede.
- Kontroller at sikkerhetspinnene er tilstede og riktig satt inn i de aktuelle setene.
- Kontroller at plasthylsene til roterende blokker er tilstede og ikke utslitt.

Hvis det oppdages tegn på slitasje eller skade under inspeksjon, må du slutte å bruke enheten og umiddelbart kontakte Ferno Washington Italias tekniske støttetjeneste.

ITC-HL-systemet krever ingen form for smøring.



ADVARSEL

Damp og høytrykksvann kan trenge inn i leddene, noe som resulterer i korrosjon og eliminering av smøremiddel. Ikke bruk høytrykksvann eller damp for å rengjøre/desinfisere ITC-HL-låsesystemet.

VEDLIKEHOLD

Rutinemessig og forebyggende vedlikehold

Båren er et medisinsk utstyr som krever regelmessig vedlikehold, derfor anbefales det å overholde følgende tidsplan:

* RUTINEVEDLIKEHOLD: Båren må utsettes for et rutinemessig vedlikeholdsinngrep en gang i året av dyktige Ferno-teknikere.

* FOREBYGGENDE vedlikehold: Forebyggende vedlikeholdsoperasjoner skal utføres av brukeren, som spesifisert i tabellen til høyre.

Hvis apparatet gjennomgår spesielt mye bruk, bør vedlikeholdet fortrinnsvis utføres hyppigere. Hvis det er tegn på slitasje og skade, må du slutte å bruke enheten og umiddelbart kontakte Fernos tekniske støttetjeneste.

Ferno utfører reparasjons-/vedlikeholdsoperasjoner direkte, uten behov for forhandlere, mekanikere eller eksterne servicesentre. Du inviteres dermed til å være på vakt mot de som presenterer seg som Fernos autoriserte teknikere. Vi foreslår at du kontakter vår SOS Ferno-tjeneste direkte.

Desinfeksjon

1. Rengjør overflatene på låseanordningen med et ikke-slipende overflatedesinfeksjonsmiddel.
2. Ikke senk låseanordningen direkte i desinfeksjonsmiddel.
3. Sørg for at det ikke er tegn til slitasje og/eller skade under desinfeksjon.
4. Tørk med en klut. Sørg for at alle komponentene til enheten er helt tørre før du bruker dem på nytt.

Det anbefales å bruke egnede hansker (f.eks. husholdnings- eller engangshansker) under desinfeksjon.

Rengjøring

1. Rengjør overflatene på låseanordningen med en klut, vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel.
2. Tørk med en klut.

Ikke vask med høytrykksvann.

Det anbefales å bruke egnede hansker (f.eks. husholdnings- eller engangshansker) under rengjøring.

Undersøkelse

For å sikre optimal bruk av låseanordningen er det viktig å holde alle komponentene i god stand og å fjerne alle spor av skitt, rusk og kroppsvæsker. Når den ikke er i bruk

låseanordning må oppbevares i et tørt, innendørs miljø og kontrolleres minst en gang i måneden.

Inspiser låsesystemet og kontroller at det ikke er slitte, bøyd, skadede eller manglende komponenter/deler. Hvis det oppdages tegn på slitasje eller skade under inspeksjon, må du slutte å bruke låseanordningen og umiddelbart kontakte Fernos tekniske støttetjeneste for å be om reparasjoner eller vedlikehold. Se kapittel 6 *Teknisk støtte*.

Rutinemessig og forebyggende vedlikehold	Etter hver bruk	Når som helst nødvendig	Hver måned
Desinfeksjon		•	
Rengjøring		•	•
Undersøkelse	•	•	•

ADVARSEL

Feil vedlikehold kan forårsake alvorlige ulykker og/eller skader. Utfør vedlikehold som instruert i denne brukermanualen.

Viktig

Når den ikke er i bruk, oppbevar låseanordningen i et innendørs miljø som er tørt og beskyttet mot direkte sollys.

Viktig

Etter desinfeksjon/rengjøring, sørg for at låseanordningen og dens komponenter er helt tørre før bruk.

Viktig



IKKE SMØR LÅSEHETEN

ITC-HL-låsesystemet krever ikke smøring;
IKKE smør låseanordningen.

Viktig

IKKE VASK MED HØYTRYKK VANN



Ikke bruk høytrykksvann for å rengjøre låseanordningen.

TEKNISK STØTTE

Teknisk støttetjeneste

For teknisk støtte angående våre produkter, kontakt Ferno Washington Italias tekniske støttetjeneste.

Telefon (gratis i Italia)	800.501.711
Telefon	+ 39 0516860028
Faks	+ 39 0516861508
E-post	assistenza@ferno.it
Nettsted	www.ferno.it

For informasjon om bruken av ITC-HL-låseenheten og for å planlegge kurs om riktig bruk av enheten, kontakt Ferno Washington Italias kundeserviceteam.



ADVARSEL

Uoriginale reservedeler og mangelfulle reparasjoner kan forårsake skade og/eller personskade. Bruk kun originale Ferno-deler og henvend deg kun til Ferno Washington Italias kundestøtte.



ADVARSEL

Uautoriserte modifikasjoner av låseanordningen kan forårsake alvorlig skade, personskade og/eller uforutsette driftsproblemer. Ikke modifier eller modifier låseanordningen på noen måte.

GARANTI

Garantivilkår og -betingelser

Fernos produkter er garantert mot produksjonsfeil i en periode på 24 måneder fra datoen på Ferno Washington Italia srl fraktdokumentet.

Ferno Washington Italia garanterer sine reservedeler i en periode på 12 måneder.

I løpet av garantiperioden vil Ferno reparere og/eller erstatte alle deler som viser seg å ha produksjonsfeil gratis, unntatt kostnadene for arbeid, reise, transport og emballasje.

Garantien dekker ikke forbruksvarer eller deler som er utsatt for slitasje på grunn av normal bruk av produktet, alle deler som vanligvis utsettes for glidende eller rullende friksjon (lager, børster, smøremidler, sko, belter, etc.), deler som potensielt er utsatt for oksidasjon eller korrosjon (kobber- eller metallegeringskontakter, elektrisk, elektronisk og mekanisk utstyr) og batterier. Overflatebehandlingen (gelcoat/harpiks, maling, pulvermaling, dekal, tape, inskripsjoner osv.) er garantert i 90 dager.

Reparasjoner utføres av opplært teknisk personale ved Washington Ferno Italia srl-anlegget i Via Zallone 26-40066 Pieve di Cento (BO), eller hos kunden dersom passende avtaler med Ferno Washington Italias kundeservice er gjort. Teknisk støtte i Kundens lokaler må avtales på forhånd og innebærer refusjon av påløpte kostnader og dokumentert på forespørsel. For informasjon om kostnadene for teknisk støtte, vennligst kontakt den relevante avdelingen hos Ferno Washington Italia srl

Reparasjoner er garantert i 6 måneder fra reparasjonsdatoen. Denne garantien gjelder kun når produktet brukes i henhold til instruksjonene i brukermanualen som følger med.

Misbruk og uaktsomhet gjør denne garantien ugyldig.

Garantien er gyldig fra den dagen produktet sendes fra Ferno Washington Italia srl, og fraktkostnadene dekkes ikke av denne garantien. Ferno Washington Italia srl er ikke ansvarlig for skader påført under forsendelse eller på grunn av misbruk av produktet.

Produkter solgt av Ferno Washington Italia srl som ikke bærer Ferno-varemerket, dekkes av garantien til den opprinnelige produsenten. Ferno Washington Italia srl forlenger ikke garantiperioden til andre produsenter; Ferno Washington Italia srl påtar seg intet ansvar for produkter produsert av andre.

Garantien er ugyldig i tilfelle av:

- manglende overholdelse av bruksanvisningen,
- misbruk,
- upassende bruk eller håndtering,
- reparasjoner utført av ikke-autoriserte personer,
- skade under transport på grunn av feil emballasje av varer returnert av brukeren,
- utilstrekkelig vedlikehold,
- manglende bruk av originale reservedeler.

I tilfeller som ikke dekkes av garantien, vil ikke Ferno Washington Italia dekke transportkostnadene for å sende eller returnere produktet.

Ansvarsbegrensning

Hvis et produkt viser seg å være defekt, vil Ferno Washington Italia srl reparere og erstatte det, eller, etter eget skjønn, refundere kjøpesummen. Under ingen omstendigheter kan Ferno Washington Italia srl holdes ansvarlig for mer enn salgsprisen på produktet. Kjøper aksepterer disse betingelsene for alle typer skader. Ferno Washington Italia srl tilbyr ikke andre garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, eller noen underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål for sine egne produkter, eller de som er produsert av andre. I tilfelle brudd på den begrensede garantien, må eventuelle rettslige skritt inngis innen ett år fra datoen da bruddet ble, eller burde vært, oppdaget. Ferno Washington Italia srl forbeholder seg retten til å si opp garantien for produktene som selges:

- hvis etikettene eller platene som bærer produsentens logo og/eller serie- eller registreringsnummer er gjort uleselige eller fjernet;

- hvis produktet har gjennomgått endringer, reparasjoner eller behandling som ikke er autorisert av Ferno Washington Italia srl og av personale som ikke er autorisert av Ferno Washington Italia;

- hvis produktet ikke brukes i samsvar med instruksjonene, eller til andre formål enn det det er laget for.

- videre til betingelsene som er angitt i avsnitt 7.1, "Garantivilkår og -betingelser".

Ferno Washington Italia srl kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade på grunn av bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i brukermanualen eller det tiltenkte formålet med produktet.

Garantikrav

Kontakt Fernos kundeservice umiddelbart dersom du mottar et produkt som mistenkes å være defekt. En representant vil bistå kunden gjennom klageprosedyren. Før du returnerer et produkt til Ferno Washington Italia srl, kontakt Ferno kundeservice for å be om autorisasjon.

Påstander

Eventuelle krav må kommuniseres til forhandleren, eller til Ferno Washington Italia srls kundeservice, innen 5 dager etter mottak av produktet eller etter oppdagelsen av den påståtte defekten.

Krav eller tvister vedrørende et enkelt produkt fritar ikke kjøper fra forpliktelsen til å hente og betale for andre produkter i bestillingen, med mindre annet er avtalt med selger.

Returautorisasjon

Ingen produkter vil bli akseptert uten forhåndsgodkjenning fra Ferno Washington Italia srl

Produkter som returneres av forretningsmessige årsaker, eller av årsaker som ikke er relatert til avvik ved produktet, vil bare bli akseptert etter verifisering av tilstanden deres av kvalifisert personell fra Ferno Washington Italia srl.

Produktbruger- og vedlikeholdshåndbok, nødvendig for å betjene produktet sikkert, opprettholde effektiviteten og påliteligheten, og overholde vilkårene i garantien.

Rel.010916

engelsk (Storbritannia)

Ferno Washington Italia srl

Via Benedetto Zallone 26 40066

- Pieve di Cento (BO) - ITALIA

Telefon (gratis i Italia)	800.501.711
Telefon	+ 39 0516860028
Faks	+ 39 0516861508
E-post	info@ferno.it
Nettsted	www.ferno.it