

S-240E, S-242E stol

40-E, 42-E stol

HÅNDBOK





Les denne håndboken og behold for fremtidig referanse

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, bruk og vedlikehold av denne stolen. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av denne stolen er bare etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste for brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak som er tatt av brukeren, bør være innenfor og under hensyn til gjeldende forskrifter. Det anbefales at det gis opplæring i riktig bruk av denne stolen før du bruker denne stolen i en faktisk situasjon. Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med stolen i tilfelle overføring til nye brukere. Ytterligere gratis eksemplarer er tilgjengelig på forespørsel fra FERNO Manufacturing.

Modell S-242 E Stol Produktspesifikasjoner

Dybde åpen 74 cm
brettet 17 cm
Bredde 53 cm
Høyde 92 cm
Enhetsvekt 11,6 kg
Vektgrense 159 kg

TIPS: Regelmessig rengjøring bidrar til å redusere risikoen for overføring av sykdom og gjør at utstyret kan fungere optimalt

WARNING

Utrente operatører kan forårsake personskade eller bli skadet. Tillat bare opplært personell å betjene stolen.

Feil bruk av stolen kan forårsake personskade. Bruk stolen kun til det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk stolen bare som beskrevet i denne håndboken.

En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Hold deg ved pasienten til enhver tid.

En pasient som ikke er festet, kan falle av stolen og bli skadet. Bruk festeanordninger for å feste pasienten på stolen.

Hjelpere kan forårsake skade. Oppretthold kontrollen over stolen, betjen kontrollene og rettled alle hjelpere.

Hjelpere kan bli skadet. Vis hjelpere hvor du skal ta tak i stolen for å unngå klemmer.

Feil vedlikehold kan forårsake personskade. Vedlikehold stolen kun som beskrevet i denne håndboken.

Feil deler og service kan forårsake personskade. Bruk bare Ferno-deler og Ferno-godkjent service på stolen.

Endring av stolen kan forårsake personskade og skade. Bruk stolen kun som designet av Ferno.

Å feste feil ting på stolen kan forårsake personskade. Bruk bare gjenstander som er godkjent av Ferno på stolen.

| Produktnummer | Produktnavn | GTIN / UDI |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| 60-0110-009 | STOL S-240E ORANGE (PAKKET) | 8588008129708 |
| 60-0110-010 | STOL S-242E ORANGE (PAKKET) | 8588008129715 |
| 60-0110-013 | STOL 40-E (PAKKET) | 8588008129722 |
| 60-0110-014 | STOL 42-E (PAKKET) | 8588008129739 |

S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E Stolinstruksjoner

[Produktnavn] Medisinsk utstyr S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stol

[Tiltenkt bruk]

Model S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stolen er nødordning for pasienthåndtering. Hver stol i serien er for profesjonell bruk av minst to utdannede operatører. Stolen kan bæres av operatørene.


I denne håndboken brukes det generiske begrepet "stol" når funksjonen deles av alle modellene i serien. Navnet på den enkelte stolen brukes når funksjonene er forskjellige.

[Applikasjon]

Model S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E Chair er nødstolen som er valgt for: Militærmedisiner, atletiske trenere, First Responders, Ambulansetjeneste, Redningstjeneste, Ski Patrulje, Sikkerhets personell, Veterinærer og mer.

[Bruksanvisning]

Åpner og bretter ut stolen

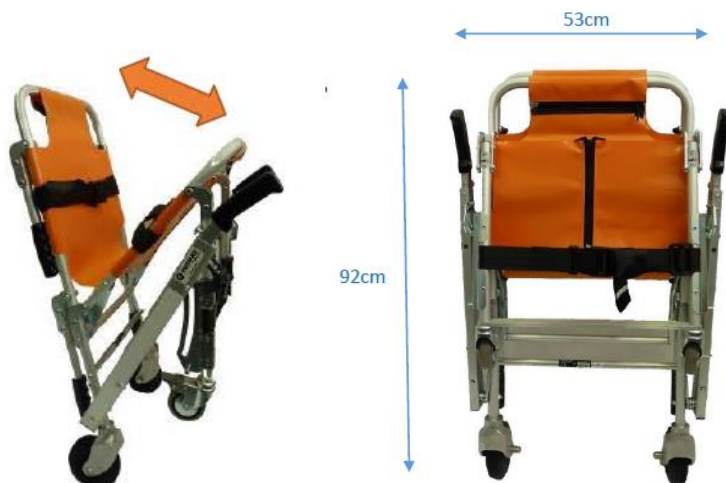

[Rengjøring og desinfisering]

Tørk av alle overflater med desinfeksjonsmiddel. Følg desinfeksjonsmiddelprodusentens instruksjoner for påføringsmetode og kontakttid. Ferno anbefaler at du inspiserer stolen for skader når du desinfiserer den.

[Inspisere stolen]

La servicepersonellet til serviceutstyret ditt inspisere stolen regelmessig.

Hvis inspeksjonen viser skade eller overdreven slitasje, må du ta stolen ut av drift til reparasjonen er utført.

[Deler og tjenester]

For å bestille Ferno-deler og for profesjonell stolreparasjon, kontakt FERNO eller din Ferno-distributør. Distributøren din er den eneste representanten autorisert av Ferno for å administrere, servicere og reparere Ferno-produkter.

Ferno Slovakia Kontakt:

Ferno Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07 Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Oppbevaring]

Unngå høy temperatur og fuktighet

[Samsvarserklæring]

Modell S-240E, S-242E, 40-E, 42-E stol nevnt i denne håndboken ble designet, produsert og testet for å oppfylle spesifikasjonene i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Advarsel

Bruk under veiledning av legen eller sykepleieren



Ferno Washingtom Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italia
+39.051.6860028

