



Malli 11- 0127A - SS Spartan - 2-osainen koripaari

Malli 11- 0127TI - TitaniumSpartan - 2-osainen koripaari

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöopas sisältää yleiset ohjeet tämän tuotteen käytöstä, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät ole kattavia. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on vain käyttäjän mielestä haittaa. Turvallisuustiedot sisältyvät käyttäjän palveluun. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien toimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja niiden tulee olla niiden mukaisia. On suositeltavaa antaa koulutusta tuotteen asianmukaisesta käytöstä ennen tämän tuotteen käyttöä todellisessa tilanteessa.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempiä tarvetta varten. Sisällytä se tuotteeseen, jos se siirretään uusille käyttäjille. Muita ilmaisia kopioita on saatavilla osoitteessa Asiakaspalvelun pyyntö.

Omistusoikeusilmoitus

Tässä käsikirjassa paljastetut tiedot ovat TraverseRescue, LLC: n, Mississauga Kanadassa, omaisuutta. Traverse Rescue, LLC. pidättää itsellään kaikki niihin liittyvät patenttioikeudet, omistusoikeusmallit, valmistusoikeudet, jäljentämisen käyttöoikeudet ja myynnin käyttöoikeudet sekä niihin sisältyvät artikkelit paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille tai jos ei koske toimittajan omia osia.

© Tekijänoikeus Traverse Rescue, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A 3V3

Puhelin: 905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat): 1 866 998 7866
Faksi: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Iso-Britannia
44 (0) 1274 851999

Traverse Rescue, LLC valmistaa tuotteitaan tiukan laadunhallintaohjelman mukaisesti. Tunnustamme ja noudatamme myös kaikkia sovellettavia standardeja, jotka koskevat kutakin tuotetta.

Traverse Rescue, LLC: n valmistamat koripaarit on määritetty luokan 1 lääkinnällisiksi laitteiksi.

1. Turvallisuustiedot

1.1 Varoitukset

Seuraavassa on tämän käsikirjan varoituksia:

!!! VAROITUS !!!

Koulutukseton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää tätä pelastusjätettä.

*

Tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen

*

Rajoittamaton tai väärin kiinnitetty potilas voi loukkaantua. Kiinnitä potilas aina koripaareihin tilanteen mukaisella turvajärjestelmällä

*

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotetta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Potilas, jota ei ole hoidettu, voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina

*

Auttajat voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Säilytä koripaarien hallinta ja ohjaa kaikki avustajat

*

Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Huolehdi tuotteesta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä pelkästään Traversen hyväksymiä osia ja huoltoa

*

Koripaarien muuttaminen voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Käytä tuotetta vain Traversen myymänä.

*

Sopimattomien tai sopimattomien esineiden kiinnittäminen koripaareihin voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotteesta vain Traverse-hyväksytyjä lisäosia.

*

1.2 Tärkeää

Alla olevan kaltaiset laatikot korostavat tärkeitä tietoja.

TÄRKEÄ

Köysiä, valjaita, ja muita henkilökohtaisia suojarusteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Pelastushenkilöstön ei pitäisi yrittää tällaisia pelastusmenettelyjä, ennen kuin he ovat saaneet ammattitaitoista opastusta ja koulutusta.

1.3 Veren kautta tarttuvaa tautia koskeva ilmoitus


OSHA (työturvallisuus- ja työterveyshallinto) vaatii työnantajia suojelemaan työntekijöitä työpaikalta altistumiselta veressä tarttuville sairauksille, kuten HIV-1 ja hepatiitti. Noudata tämän käsikirjan desinfiointi- ja puhdistusohjeita altistumisriskin vähentämiseksi pelastuspyyhettä käytettäessä.

1.4 Turvatarrat

Tarrat sisältävät tärkeitä tietoja käyttäjän käsikirjasta.

Lue etiketin ohjeet ja noudata niitä. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet tarrat välittömästi. Uusia tarroja on saatavana Traversesta.

Esitetty Maksimikuorma-tarra on kiinnitetty koripaareihin.

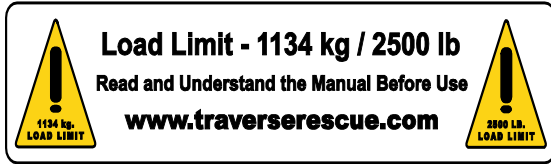

2. Työntekijän taidot ja koulutus

2.1 Taidot

Vain koulutetut käyttävät tuotetta:

Toimiva tieto potilaiden hätätilanteiden käsittelymenettelyistä.

Kyky auttaa potilasta

Täydellinen käsitys tässä kuvatuista menettelyistä

manuaalinen

2.2 Koulutus

Työntekijöiden on:

Noudattaa suunnittelemaa ja hyväksyttyä koulutusohjelmaa.

Lue tämä käyttöopas. Saat lisää ilmaisia käyttäjien käsikirjoja ottamalla yhteyttä Traverseseen

Esimies.

Harjoittaa koripaarien kanssa, ennen kuin käyttää sitä säännöllisesti

Testataa heidän ymmärryksestään

koripaareista. Kirjaa heidän koulutustietonsa

3. Tietoja koripaareista

3.1 Yleiset eritelmät

Polyeteeniverkko ... - 65 ° F / -54 ° C - + 200 ° F / + 93 ° C

Kiinnityss nauha

Vetolujuus 975 paunaa. / 442 kg

Kuormitettavuus 500 lbs. / 227 kg

kiinnityssoljet

Pienin vetolujuus 4000 lbs. / 1814 kg

Soljet täyttävät ANSI Z359.1 ja CSA Z259.1

Traverse pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Spartan SS (ruostumaton teräs), TI (titaani)			
Pituus	85,8 tuumaa	217,8 cm	2178 mm
Leveys	24,9 tuumaa	63,2 cm	632 mm
Syvyys	7,0 tuumaa	17,8 cm	178 mm
Paino - SS	35 paunaa	16 kg	
Paino - TI	25 paunaa	11kg	
Nimelliskuormitusraja	2500 paunaa	11 kN	

!!! VAROITUS !!!

Koulutukseton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Anna pelastusvälineen käyttö vain koulutetulle henkilöstölle.

Tärkeä

Köysiä, valjaita, suitset ja muita henkilökohtaisia suojavausteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Mikään pelastushenkilöstö ei saa yrittää tällaisia pelastustoimenpiteitä, ellei hän ole saanut ammattikoulutusta ja koulutusta

4. Rajoitukset


4.1 Tietoja rajoituksista

Tähän tuotteeseen sisältyy yhteensä neljä turvajärjestelmää.

Näiden rajoitusten on täydennettävä sitä, mitä tyypillisesti käytät potilaan sitomiseen korkealla ja tai köysipelastamisessa. Olemme tehneet ne sopivaan lujuuteen täydentämään pelastusköysiä. Nämä turvajärjestelmät on tarkoitettu vain potilaan kiinnittämiseen koripaareihin, eikä niitä saa käyttää nostamiseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen.

4.2 Turvalaitteiden kiinnittäminen ja kiristäminen

Kolmitankoisella soljella varustettu hihna on rakennettu silmukkapäästä, joka kiinnittyy tuotteeseen, jota käytetään turvajärjestelmän kiristämiseen (kuva 1).

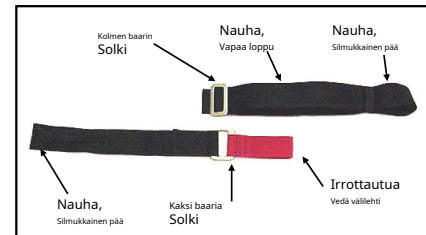


Kuva 1, komponentit

TÄRKEÄ


Henkilökunta, joka käyttää tuotetta korkean työskentelyn tai köysipelastustilanteissa, on vastuussa tekniikoiden tuntemisesta ja kuhunkin pelastustilanteeseen parhaiten soveltuvien laitteiden ja menettelytapojen valitsemisesta.

1. Vie kolmen tangon solki ja hihna ylöspäin kaksitankoisien soljen aukon läpi (kuva 2). Vedä hihnan vapaa pää kokonaan aukon läpi.

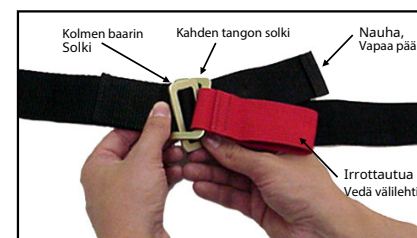

Kuva 2, Soljen kiinnitys

2. Vedä hihnan vapaasta päästä hieman, jotta kolmipalkkinen solki pysyy tukevasti kaksitangon soljen päällä (kuva 3).

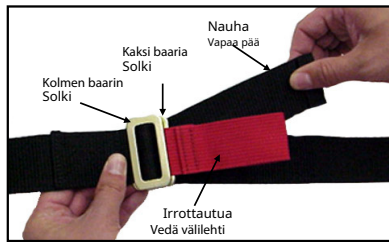

Kuva 3, Solkien istuttaminen

3. Kiristä turvalaite vetämällä hihnan vapaasta päästä.

4.3 Turvalaitteiden löysääminen ja irrottaminen


Löysää turvajärjestelmää vetämällä irrotettava kieleke solkea kohti (kuva

- 4). Jatka vetämistä, kunnes turvajärjestelmä on niin löysä kuin haluat.



Kuva 4, irrotuksen pidätys

Irrota turvalaite löysäämällä ensin kuten vaiheessa 1, käännä sitten kolmipalkkinen solki ja vie se alas kaksitankoisen soljen aukon läpi (kuva 5).

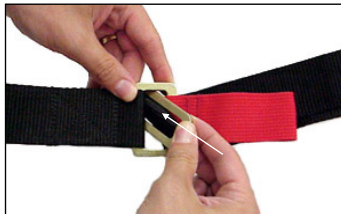

Kuva 5, Soljen irrotus

4.4 Kiinnittimien kiinnittäminen

Suuri tiheyksisen polyeteeniverkon yläreuna on muotoiltu lahtia tarjotad kohtaan

r: n alempi kisko




Kuva 6, turvaovi

Valitse kiinnityspisteet, jotka soveltuvat potilaan tehokkaaseen kiinnittämiseen sekä työskentelyyn yhdessä oman kiinnitysjärjestelmän kanssa.


Kiinnitä mukana toimitetut turvajärjestelmät seuraavasti:

1. Irrota solki kiinnityshihnojen erottamiseksi.
2. Vie hihnan silmukoitu pää sisään päin koripaarien ulkopuolelta sisään päin pelastuskiskon ja verkon väliin valitussa kiinnityskohdassa. (Kuva 7)

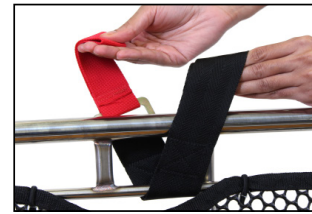

Kuva 7, Silmukaisen pään kulkeminen poukaman läpi

3. Pujota silmukka on ull kunnes

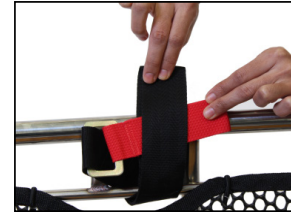

Kuva 8, langansolki

4. Kiinnitä jäljellä oleva hihna pelastusjätteen vastakkaiselle puolelle vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.

5. Koripaarien käyttäminen

5.1 Ennen koripaarien käyttöönottoa

- Henkilöiden, jotka käyttävät tätä tuotetta, on luettava tämä opas.
- Jos käytät mukana toimitettuja turvajärjestelmiä, kiinnitä ne liitteen ohjeiden mukaisesti rajoitukset.
- Varmista, että tuotteen, rajoitteet ja verkoverkot ovat hyvä kuntoisia. Noudata tämän oppaan kohdassa Tuotteen tarkastaminen, annettuja ohjeita.

5.2 Yleiset käyttöohjeet

- Tuote edellyttää vähintään kahta koulutettua käyttäjää. Useimmissa tilanteissa käyttäjät saattavat tarvita lisäapua.
- Lisätietoja avustajien sijoittamisesta ja suunnasta on kohdassa Pelastaminen tässä käyttöoppaassa.
- Noudata potilaan tavanomaisia hätätilanteiden käsittelymenetelmiä käyttäessäsi pelastuspentue. Pysy potilaan kanssa aina.
- Käytä aina mukana olevia potilaan turvajärjestelmiä sekä lisämaksua turvajärjestelmä koulutus- ja tiimiprotokolliesi sekä tilanne.
- Käyttäjä, joka käyttää tuotetta korkealla/syvällä työskenneltäessä, on vastuussa asianmukaisten tekniikoiden oppimisesta sekä pelastustilanteeseen parhaiten soveltuvien laitteiden ja menettelyjen valitsemisesta.

5.3 Koripaarien kantaminen

Koripaarien kantaminen vaatii vähintään kaksi käyttäjää. Lisähenkilöstö on, jopa tarpeen useimmissa tilanteissa. Käytä parillista määrää käyttäjää ja sijoita heidät pitämään tuotteen mahdollisimman tasaisina.

Lisäohjeen käyttäminen

Käyttäjien tulisi ohjata lisähenkilöstöä.

5.4 Koripaarien liu'uttaminen

Liu'uta tuotetta tasaisilla pinnoilla. Vältä kiviä, kantoja, oksia tai muita vaaroja, jotka voivat tunkeutua verkkoon tai aiheuttaa epämuikavuutta tai vammoja potilaalle.

5.5 Koripaarien kuljettaminen ambulanssin paareilla

Kiinnitä koripaari pidikkeillä.

5.6 Korkealla ja/tai köysi pelastus


Korkealla- ja/tai köysipelastus voi sisältää minkä tahansa yhdistelmän köysiä, vinssejä, hihnapyöriä, roskasuojia, sisäkäyttölaitteita ja monia muita erikoistuotteita ja laitteita, joita on liian monta mainita. Näiden työkalujen asianmukainen ja turvallinen käyttö vaatii ammattitaitoista opetusta ja koulutusta.

Kun käytät korkealta pelastamisen välineitä tai köysivälineitä tuotteen kanssa, varmista, että laitteilla on riittävä kuormitus ja että ne ovat vähintään yhtä suuret kuin koripaarien.

Korkealta tai köysipelastuksen aikana koripaari voi olla suunnattu pystysuoraan, vaakasuoraan tai muihin asentoihin. Kiinnitä potilas tuotteeseen niin, että hän ei luiskahda mihinkään suuntaan tai voi vahingossa tulla ulos tuotteesta.

Kiinnityspisteet

Rescue-pareissa on useita kiinnityskohtia, joihin karabiinit tai köydet voidaan kiinnittää ylempään kiskoon. Vaihtoehtoisesti tämä tuote on sisällyttänyt siihen patentoidun SträtLoad™ -ominaisuuden, joka sallii erilliset kiinnityskohdat, kun niitä kiinnitetään nelipistekohtiin vaakasuoraan nousuun tai laskemiseen.

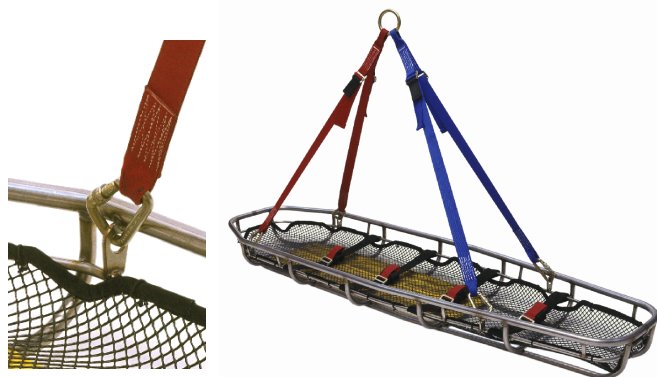

TÄRKEÄ

Köysiä, valjaita, suitset ja muita henkilökohtaisia suojarusteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Pelastushenkilöstön ei pitäisi yrittää tällaisia pelastusmenettelyjä, ennen kuin he ovat saaneet ammattitaitoista opastusta ja koulutusta.

!!! VAROITUS !!!

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotetta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

!!! VAROITUS !!!

Valvomaton potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina.


!!! VAROITUS !!!

Rajoittamaton tai väärin pidätetty potilas voi kärsiä loukkaantumisista. Kiinnitä potilas aina turvatoimisella turvajärjestelmällä.

5.7 Split-Apart-ominaisuuden käyttö

Traverse Split-Apart -tuotteet tarjoavat erittäin nopean asennusajan ja ei ole asetettavia nastoja jne.

Alempi liitin, hampaat lukittu

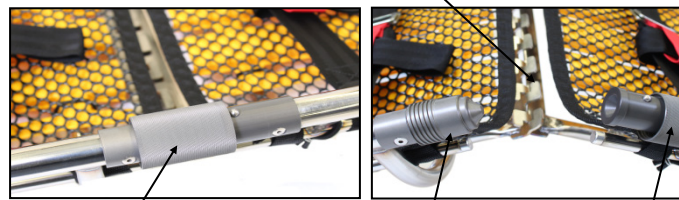

Täysin kytketty

Kierretty urosliitinosa

Holkki

Ennen aloittamista muista puhdistaa kaikki lika, muta, lumi

jne. Kokoonpano:

Suuntaa tuotteen kaksi avointa osaa toisiaan kohti Nosta avoimet päät samanaikaisesti noin 30° kulmaan ja liu'uta molemmat osat yhteen lukitsemalla kaikki pohjaliittimien hampaat.

Laske nyt lukkiutuneet osat lattialle. Varmista, että ylempien liittimien osat ovat yhteensopivat

Käännä holkit ylempien liittimien vastakkaisiin kierteisiin.

Varmista, että nämä kiristysholkit ovat tiukasti kiinni ja että ketjuja ei näy.

Pura se yksinkertaisesti kääntämällä yllä oleva järjestys.

Huomaa: On ehdottoman tärkeää, että tarkistat tämän eheyden koko pelastuksen aikana pelastuksen aikana tai käytännössä. Jos ylempässä liittimessä näkyy kierteitä, kiristä holkit uudelleen.

6. Koripaarien ylläpito

6.1 Huoltoaikataulu

Koripaari vaatii säännöllistä huoltoa. Määritä ja noudata huoltoaikataulua, kuten alla olevassa lomakkeessa. Tämä lomake edustaa vähimmäishuoltoa, ja voit muokata omaa tarpeisiisi perustuva ohjelma.

	Jokainen käyttö	Tarvittaessa	Joka kuukausi
Desinfiointi (6.3)	•		
Puhdistus (6.3)		•	
Tarkastus (6.4)		•	•

Noudata huoltotuotteita käyttäessäsi valmistajan ohjeita ja lue valmistajan käyttöturvallisuustiedotteet.

!!! VAROITUS !!!

Virheellinen huolto voi aiheuttaa vammoja. Ylläpidä pelastustietokonetta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

6.2 Turvalaitteiden desinfiointi ja puhdistus

Poista turvajärjestelmät tuosteista.

Soljet, kiinnikkeet pesupussiin ennen pesua. Tämä auttaa estämään solkien tai pesukoneen vaurioitumisen.

Aseta taitetut turvajärjestelmät pesupussiin (ei sisälly toimitukseen) ja aseta ne teolliseen pesukoneeseen.

Pese turvalaitteet lämpimässä vedessä desinfiointiaineella ja kevyellä sekoituksella. Älä käytä valkaisuainetta.

Poista turvajärjestelmät pesupussista ja ripusta kuivumaan. Älä laita turvajärjestelmiä

kodin tai kaupallisen kuivausrummun sisään.

Kiinnitä puhtaata, kuivattua turvajärjestelmät ohjeiden mukaisesti

6.3 Tuotteen desinfiointi ja puhdistus

Pyyhi tai suihkuta kaikki tuotteen pinnat ja turvalaitteet desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineiden valmistajien ohjeita. Traverse suosittelee, että tuote ja turvalaitteet tutkitaan ilmeisten vaurioiden varalta.
Puhdista tuote ja turvalaitteet käsin miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa pyyhkeellä.

TÄRKEÄ

Desinfiointiaineet ja puhdistusaineet, jotka sisältävät valkaisuainetta, fenoleja tai jodia, voivat vahingoittaa turvalaitteita ja tuotetta. Desinfioi ja puhdista vain tuotteilla, jotka eivät sisällä näitä kemikaaleja.

6.4 Tuotteen ja turvalaitteiden tarkastus

asemiasi / palvelujen huoltohenkilöstö tarkista seuraavat:
Kaikki komponentit esillä
Hitsausliitoksissa ei saa olla halkeamia tai muita merkkejä murtumisesta. Tuotteen rungon (ylä- ja alakiskot, kiskot, kylkiluut) tulisi olla vapaita, kolhuja, halkeamia tai tahattomia taipumia ei saa esiintyä.
Polyeteeniverkossa ei saa olla murtumia ja repeämiä kiinnitettävä tukevasti alempaan kiskoon.
Sinisen selkänojan tulee olla kiinnitetty tukevasti paikalleen. Varoitustarrojen tulee olla selkeitä ja luettavia kaikkien käyttäjien nähtäväksi ja lukea.
Turvavyön tulee olla hyvässä kunnossa ilman viiltoja tai vaurioita. Turvavyön soljissa ei saa olla näkyviä vaurioita. toimivat oikein.

Jos tarkastuksessa ilmenee vaurioita tai liiallista kulumista, poista pelastushiekka käytöstä, kunnes tarvittavat korjaukset on suoritettu (katso Korjaus, osat ja huolto, osa 7).

6.5 Tuotteen säilyttäminen

Säilytä tuote kuivassa paikassa. Varmista, että tuote on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen varastoon.

7. Korjaus, osat ja huolto

Jos tuotteessa on liiallista kulumista tai halkeamia (joko materiaalisia tai hitsissä), on aika poistaa se käytöstä. Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään metalliosia tai hitsiaineita.

Jos mesh-vuori, selkätuki, potilaan turvahihnat tai mahdolliset tarrat ovat vaurioituneet ja tarvitsevat korjausta, soita jälleenmyyjälle tai meille, jotta ne vaihdetaan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Osa numero	Kuvaus
04-0108	Kiinnityshihna
08-0102	Maksimikuorma -tarra
11-2006	Holkkiuojat (4 kpl)

Lisätarvikkeet

Traverse tarjoaa täyden valikoiman lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi Titan-sarjan tuotteen kanssa.

Noudata aina lisävarusteiden mukana toimitettuja ohjeita. Säilytä tämän käyttöohjeen ohjeet. Ole tietoinen kaikista erityisistä näkökohdista (lastauskorkeus, oven korkeus jne.)

Osa numero	Kuvaus
15-0108	Rankalaudat
15-0109	Tyhjiöpajat
11-2220	Mule II -kuljetusalusta
05-0145	kahvoilla
11-0124A	2-osainen kelluva kaulus

Liittyvät tuotteet

Osa numero	Kuvaus
16-0100	540 °™ Rescue Belay-Large
16-0200	540 °™ Rescue Belay-Small

8. Rajoitettu Wa takuu

Traverse Rescue, LLC (Traverse) Rajoitetun takuun mukaan kaikilla Traverse-tuotteilla on alkuperäisen ostajan takuu yhden vuoden ajan laskutuspäivästä. Tämä takuu on annettu materiaali- tai valmistusvirheitä tai vikoja vastaan. Jos tämän takuuajan aikana ilmenee tällainen vika, ota välittömästi yhteys Traverse Rescueen. Traverse Rescue, LLC sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisen tuotteen (valintamme mukaan). Rajoitettu takuumme ei kata väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, hoidon puutteesta, väärästä käytöstä tai onnettomuuksista johtuvia vahinkoja. Se ei myöskään korvaa vahinkoja, jotka johtuvat ostajan korjausyrityksestä, jota Traverse Rescue, LLC ei ole valtuuttanut. Traverse Rescue, LLC ei esitä muita takuita. Tämä rajoitettu takuu ei sulje pois, eikä Traverse ole vastuussa mistään rankaisevasta, satunnaisesta, erityiset tai esimerkilliset vahingot, jotka johtuvat Traversen tai muuten tapahtuvan myynnin takuun rikkomisesta tai kolmannen osapuolen osan, tuotteen, palvelun tai järjestelmän suorittamisesta tai laiminlyönnistä. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita millään tavalla eikä muuta millään tavalla muiden valmistajien takuita tuotteille, joita Traverse Rescue, LLC myy.

9. Käy läpi asiakaspalvelua

Asiakaspalvelu ja tuotetuki ovat tärkeitä näkökohtia jokaiselle Traverse-tuotteelle.

Ota yhteyttä Traversen asiakaspalveluun saadaksesi apua tässä tai muussa Traverse-tuotteessa.

Ole hyvä ja pidä Traverse-pelastuspäällyksen sarjanumero saatavilla, kun soitat Traverse-asiakaspalveluun, ja lisää tämä numero kirjalliseen viestiin.

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A 3V3

Puhelin 905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat)1 866 998 7866
Faksi 905 615 1199
Sähköposti info@traverserescue.com
Verkkosivusto www.traverserescue.com



