


Suunniteltu tehtäväsi varten

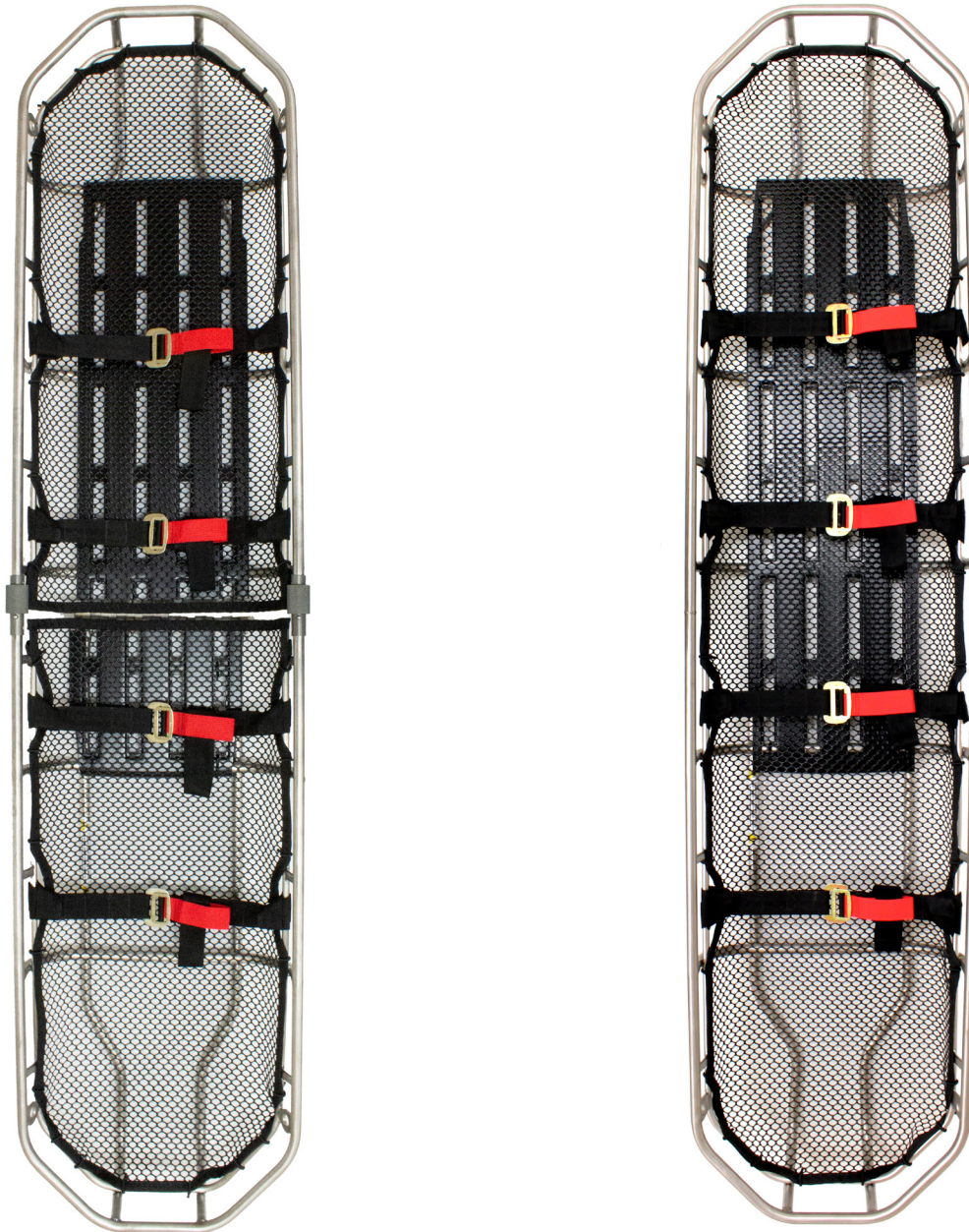

Malli 11-4001 Pinnacle - Ti, kahteen osaan jaettava

Malli 11-4000 Pinnacle - Ti, 1 kpl

Vastuuvapauslauseke

Tämä käsikirja sisältää yleiset ohjeet tämän tuotteen käyttöön, toimintaan ja hoitoon. Ohjeet eivät kata kaikkea. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnassa. Turvallisuustiedot sisältyvät palveluna käyttäjälle. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien toimenpiteiden tulee olla sovellettavien määräysten mukaisia ja niitä on huomioitava. On suositeltavaa järjestää koulutus tämän tuotteen oikeasta käytöstä ennen kuin käytät tätä tuotetta todellisessa tilanteessa. Säilytä tämä käyttöopas myöhempiä tarvetta varten. Sisällytä se tuotteen mukana, jos siirrä sen uusille käyttäjille. Ilmaisia lisäkopioita on saatavilla pyyntö asiakaspalvelusta.

Omistusoikeusilmoitus

Tässä oppaassa esitetyt tiedot ovat Traverse Rescue, LLC:n, Oakville, ON Canada, omaisuutta. Traverse Rescue, LLC. pidättää kaikki patenttioikeudet, mallioikeudet, valmistusoikeudet, jäljentämiskäyttöoikeudet ja myyntikäyttöoikeudet niihin ja kaikkiin niissä ilmoitettuihin esineisiin, paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille tai missä ei koske myyjän omistamia osia.

© Copyright Traverse Rescue, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään

Traverse Rescue, LLC.
2715 Bristol Circle, Unit 2
Oakville, Ontario
Canada L6H 6X5

Puhelin:905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat):1 866 998 7866
Faksi:905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Iso-Britannia
44 (0) 1274 851999



Traverse Rescue, LLC valmistaa tuotteitaan tiukan laadunhallintaohjelman mukaisesti. Tunnistamme ja noudatamme myös kaikkia sovellettavia standardeja, jotka koskevat jokaista tuotetta.

Traverse Rescue, LLC:n valmistamat koripaarit on määritetty luokan 1 lääkinnällisiksi laitteiksi.

1. Turvallisuustiedot

1.1 Varoitukset

Tässä oppaassa on seuraavat varoitukset:

!!! VAROITUS !!!

Kouluttamattomat käyttäjät voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää tätä koripaaria.

*

Koripaarin vééré käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Kéyté koripaareja vain tésé käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen

*

Kiinnittémétún tai vééerin kiinnitetty potilas voi saada vammoja.

Kiinnité potilas koripaareihin aina tilanteeseen sopivalla kiinnitysjärjestelmällä

*

Virheellinen kéyttú voi aiheuttaa loukkaantumisen. Kéyté koripaareja vain tésé ohjeessa kuvatulla tavalla

*

Valvoton potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa koko ajan. Ávustajat voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Séilyté koripaarin hallinta ja ohjaa kaikkia toimioita.

*

Virheellinen huolto voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita. Séilyté koripaareja vain tésé ohjeessa kuvatulla tavalla

*

Vééréet osat ja huolto voivat aiheuttaa loukkaantumisen. Kéyté koripaareissa vain Traversen hyväksymiä osia ja huoltoa

*

Koripaarin muuttaminen voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Kéyté koripaareja vain sellaisina kuin Traverse myy.

*

Sopimattomien tai sopimattomien esineiden kiinnittäminen koripaareihin voi aiheuttaa loukkaantumisen. Kéyté koripaareissa vain Traverse-hyväksytyjä tuotteita

*

1.2 Térkéé

Alla olevan kaltaiset laatikot korostavat térkeité tietoja.

TÄRKEÄ

Pelastustoimenpiteet kúysien, valjaiden, liinojen ja muiden henkilökohtaisten suojarusteiden avulla vaativat erityistaitoja ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimia. Pelastushenkilústún ei tulisi yrittéé téllaisia pelastustoimenpiteité ennen kuin he ovat saaneet ammatillista opetusta ja koulutusta.

1.3 Veren véilityksellé leviéivié tauteja koskeva huomautus


OSHA (Occupational Safety and Health Administration) vaatii tyúnantajia suojelemaan tyúntekijúité altistumiselta veren véilityksellé leviéiville sairauksille, kuten HIV-1 ja hepatiitti. Véhentééksesi altistumisriskié pelastushiekkoja kéytettéessé noudata témén oppaan desinfiointi- ja puhdistusohjeita.

1.4 Turvatarrat

Tarrat sijoittavat koripaareihin tärkeitä tietoja käyttöoppaasta.

Lue tarran ohjeet ja noudata niitä. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet tarrat välittömästi. Uusia tarroja on saatavana Traversestä.

Kuvassa oleva Load-Limit-tarra on kiinnitetty koripaareihin.

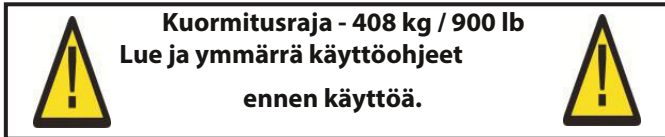

2. Käyttäjän taidot ja koulutus

2.1 Taidot

Koripaareja käyttävät käyttäjät tarvitsevat:

- Asiantuntemus kiireellisistä potilaan käsittelyistä.
- Kyky auttaa potilasta
- Tässä käsikirjassa kuvattujen menettelyjen täydellinen ymmärtäminen

2.2 Koulutus

Käyttäjät tarvitsevat:

- Noudata koulutusvastaavan suunnittelemaa tai hyväksymää koulutusohjelmaa
- Lue tämä käyttöohje. Lisää ilmaisia käyttöoppaita saat Traverse-asiakaspalvelusta.
- Harjoittele koripaarien kanssa ennen kuin käytät sitä säännöllisesti
- Testaa heidän ymmärryksensä koripaareista
- Tallenna heidän koulutustiedot

3. Tietoja koripaareista

3.1 Yleiset tiedot

Polyeteeniverkko... -65°F/-54°C - +200°F/+93°C

Rajoitusnauha

Vetolujuus.....975 lbs. / 442 kg

Kantavuus500 lbs. / 227 kg

Kiinnityssoljet

Pienin vetokuormitus.....4000 lbs. / 1814 kg

Soljet täyttävät ANSI Z359.1 ja CSA Z259.1

Traverse pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Pinnacle TI (titaani)		
Pituus	82.5 tuumaa	209,6 cm
Leveys	19 tuumaa	48,3 cm
Leveys - Jaettu erilleen	19.5 tuumaa	49,5 cm
Syvyys	7.0 tuumaa	17,8 cm
Syvyys - Split Apart	7.3 tuumaa	18,4 cm
Paino	16 lbs	7 kg
Paino - Split Apart	17 lbs	8 kg
Nimelliskuormitusraja	900 paunaa	408 kg

!!! VAROITUS !!!

Kouluttamattomat käyttäjät voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilökunnan käyttää koripaareja.

Tärkeä

Pelastustoimenpiteet köysien, valjaiden, liinojen ja muiden henkilökohtaisten suojarusteiden avulla vaativat erityistaitoja ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimia. Pelastushenkilöstö ei saa yrittää tällaisia pelastustoimenpiteitä, ellei hän ole saanut ammatillista opetusta ja koulutusta

4. Rajoitukset


4.1 Tietoja rajoituksista

Koripaarien mukana tulee yhteensä neljä turvalaitetta.

Nämä rajoitukset täydentävät sitä, mitä tavallisesti käytät potilaan sitomiseen pelastus tilanteessa. Olemme tehneet niistä sopivan vahvuuden täydentämään omaa putkimaista liinaa, narua tai vastaavaa. Nämä turvalaitteet on tarkoitettu vain potilaan kiinnittämiseen koripaareihin, eikä niitä saa käyttää nostamiseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen.

4.2 Turvalaitteiden kiinnitys ja kiristäminen

Kolmitankoisella soljella varustetussa hihnassa on silmukkainen pää, joka kiinnittyy koripaareihin, ja vapaa pää, jota käytetään turvalaitteen kiristämiseen (kuva 1).

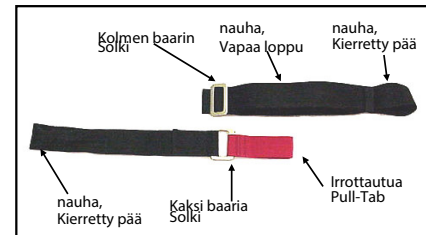


Kuva 1, Komponentit

TÄRKEÄ


Koripaareja köysipelastustilanteessa käyttävän henkilökoston vastuulla on tuntee tekniikat ja valita kuhunkin pelastustilanteeseen parhaiten sopivat välineet ja toimenpiteet.

1. Pujota kolmitankoinen solki ja nauha ylöspäin kaksitankoisen soljen aukosta (kuva 2). Varmista, että vedät nauhan vapaan pään kokonaan aukon läpi.

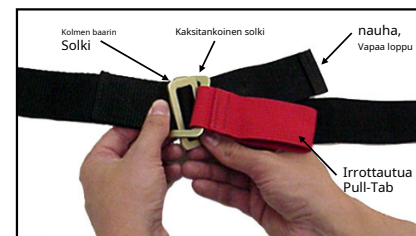

Kuva 2, Soljen kiinnitys

2. Vedä kevyesti hihnan vapaasta päästä, jotta kolmitankoinen solki asettuu tiukasti kaksitankoisen soljen päälle (kuva 3).

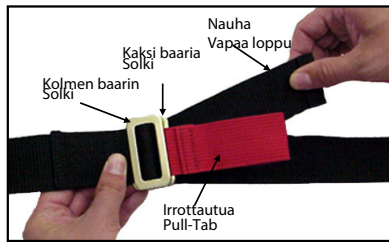

Kuva 3, Solkien kiinnitys

3. Kiristä rajoitin vetämällä hihnan vapaasta päästä.


4.3 Kiinnityslaitteiden löysäminen ja irrottaminen

Löysää turvahihnaa vetämällä irrotettavaa kielekettä vyölukkoa kohti (kuva 4). Jatka vetämistä, kunnes turvalaite on niin löysällä kuin haluat.



Kuva 4, Löystymisrajoitin

Irrottaaksesi turvaistuimen, löysää ensin kuten vaiheessa 1, käännä sitten kolmitankoinen solki ja vie se alaspäin kaksitankoisen soljen aukon läpi (kuva 5).

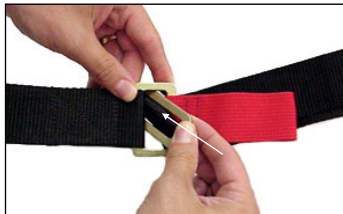

Kuva 5, Irrotussolki

4.4 Kiinnitysten kiinnitys

High Density Polyeteeniverkon yläreunassa on muotoiltu aukkoja d kohtaan r:n alakisko




Kuva 6, Kiinnitysaukko

Valitse kiinnityspisteet, jotka sopivat potilaan tehokkaaseen kiinnittämiseen sekä työskentelyyn oman kiinnitysjärjestelmän kanssa.


Kiinnitä mukana toimitetut turvalaitteet seuraavasti:

1. Irrota kiinnityshihnat irrottamalla solki.
2. Aloita koripaarien ulkopuolelta, pujota hihnan silmukkapää sisäänpäin koripaarien kiskon ja verkon väliin valitussa kiinnityskohdassa. (Kuva 7)

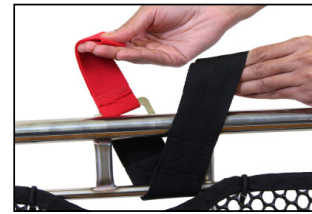

Kuva 7, Silmukkapään läpivienti koven läpi

3. Pujota lanka ull asti silmukka on

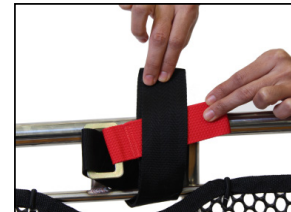

Kuva 8, Kierresolki

4. Kiinnitä jäljellä oleva hihna koripaarien vastakkaiselle puolelle vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.

5. Koripaarien käyttäminen

5.1 Ennen kuin otat koripaarit käyttöön

- Tätä koripaaria käyttävien henkilöiden on luettava tämä käsikirja.
- Jos käytät mukana toimitettuja turvalaitteita, kiinnitä ne kohdan Kiinnitysten kiinnitys ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että koripaari, turvajärjestelmät ja verkko ovat hyvässä kunnossa. Noudata ohjeita tämän oppaan kohdassa koripaarien tarkastus.

5.2 Yleiset käyttöohjeet

- Koripaarit vaatii vähintään kaksi koulutettua käyttäjää. Useimmissa tilanteissa käyttäjät voivat tarvita lisäapua. Lisätietoja avustajien sijoittamisesta ja ohjaamisesta on tämän oppaan kohdassa koripaarien kantaminen.
- Noudata tavallisia hätätilanteen potilaan käsittelymenettelyjä koripaaria käytettäessä.
- Pysy potilaan kanssa koko ajan.
- Käytä aina mukana toimitettuja potilaan kiinnityslaitteita sekä ylimääräistä kiinnitysjärjestelmää harjoituksesi ja tiimisi protokollien sekä tilanteen mukaan.
- Koripaareja köysipelastus ympäristöissä käyttävän henkilöstön vastuulla on opetella asianmukaiset tekniikat ja valita pelastustilanteeseen parhaiten sopivat välineet ja toimenpiteet.

5.3 Koripaarien kantaminen

Koripaarien kantaminen vaatii vähintään kaksi käyttäjää. Lisähenkilöstö on avuksi tai jopa tarpeen useimmissa tilanteissa. Käytä parillista määrää henkilöitä ja sijoita heidät siten, että koripaari pysyy mahdollisimman tasaisena.

Lisäohjeen käyttäminen

Käyttäjien tulee säilyttää koripaarien hallinta ja ohjata avustajia.

5.4 Koripaarien liu'uttaminen

Liu'uta koripaareja kiskoillaan sileillä pinnoilla. Vältä kiviä, kantoja, oksia tai muita vaaroja, jotka voivat tunkeutua verkon läpi tai aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja potilaalle.

5.5 Koripaarien kuljettaminen ambulanssin paareilla

Käytä parien kiinnikkeitä kiinnittääksesi koripaarit ambulansiin paareihin.

5.6 High-Angle Rescue -toimenpiteiden käyttäminen

Köysipelastus voi sisältää minkä tahansa yhdistelmän köysiä, vinssejä, hihnapyöriä, liinoja, suojalaitteita ja monia muita erikoistuneita esineitä ja laitteita, joita ei voida mainita. Näiden työkalujen oikea ja turvallinen käyttö vaatii ammattimaista opetusta ja koulutusta.

Käytettäessä koripaareja kanssa köysikäyttöisiä laitteita, varmista, että varusteiden

kuormitus on riittävä ja että se on vähintään yhtä suuri kuin koripaarien.

Köysipelastuksen aikana koripaarit voidaan suunnata pystysuoraan, vaakasuoraan tai muihin asentoihin. Kiinnitä potilas koripaareihin siten, että hän ei luiskahda mihinkään suuntaan tai pääse vahingossa ulos koripaareista.

Liittymispisteet

Rescue-koripaareissa on useita kiinnityspisteitä, joihin voidaan kiinnittää karabiinit tai köydet yläkiskoon. Vaihtoehtoisesti näihin koripaareihin on sisällytetty patentoitu SträtLoad™-ominaisuus, joka mahdollistaa erilliset kiinnityspisteet, kun ne kiinnitetään nelipisteliinoilla vaakasuoraan nostoon tai laskemiseen.



TÄRKEÄ

Pelastustoimenpiteet köysien, valjaiden, liinojen ja muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden avulla vaativat erityistaitoja ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimia. Pelastushenkilöstön ei tulisi yrittää tällaisia pelastustoimenpiteitä ennen kuin he ovat saaneet ammatillista opetusta ja koulutusta.

!!! VAROITUS !!!

Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja. Käytä koripaaria vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

!!! VAROITUS !!!

Valvomatta jäänyt potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa kaikkina aikoina.


!!! VAROITUS !!!

Levoton potilas tulee kiinnittää tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä.

5.7 Split-Apart-ominaisuuden käyttäminen

Traverse Split-Apart -koripaarit tarjoavat erittäin nopean kokoamisajan, eikä niihin tarvitse kiinnittää tappeja jne.

Alempi liitin, hampaat lukittuina

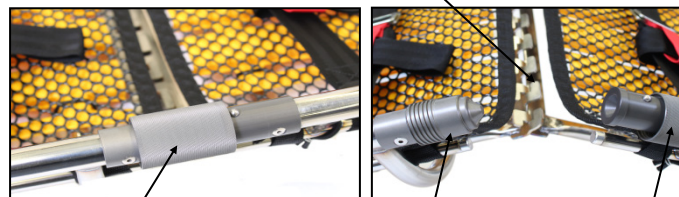

Täysin yhdistetty

Kierteinen urosliitinosa

Collet

Ennen kuin aloitat, muista puhdistaa kaikki osat liasta, mudasta, lumesta jne. Kokoaminen:

1. Aseta koripaarien kaksi avointa osaa toisiaan kohti
2. Nosta avoimet päät samanaikaisesti noin 30° kulmaan ja liu'uta kaksi osaa yhteen lukitsemalla kaikki pohjaliittimien tapit.
3. Laske nyt toisiinsa lukitut osat lattiaan
4. Varmista, että ylemmän liittimen osat sopivat yhteen
5. Käännä holkit ylempien liittimien vastakkaisten kierreosien päälle. Varmista, että nämä holkit ovat tiukasti kiinni ja ettei niissä ole kierteitä.
6. Pura yksinkertaisesti kääntämällä yllä oleva järjestys.

Huomaa: On välttämätöntä, koripaari pelastuksen aikana tarkistaa yhteyden eheyden. Jos näet yläliittimessä kierteitä, kiristä holkit uudelleen.

6. Koripaarien ylläpito

6.1 Huoltoaikataulu

Koripaarit vaatii säännöllistä huoltoa. Määritä huoltoaikataulu ja noudata sitä, kuten alla olevassa lomakkeessa. Tämä lomake edustaa minimihuoltoa, ja voit muokata omaa ohjelmaasi tarpeidesi mukaan.

	Jokainen käyttö	Tarvittaessa	Joka kuukausi
Desinfiointi (6.3)	•		
Puhdistus (6.3)		•	
Tarkastus (6.4)		•	•

Huoltotuotteita käytettäessä noudata valmistajien ohjeita ja lue valmistajien käyttöturvallisuustiedotteet.

!!! VAROITUS !!!

Virheellinen huolto voi aiheuttaa vammoja. Säilytä koripaaria vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

6.2 Kiinnityslaitteiden desinfiointi ja puhdistus

1. Irrota turvalaitteet koripaareista.
2. Lukitse kiinnikkeet ennen puhdistusta. Tämä auttaa estämään solkien tai pesukoneen vahingoittumisen.
3. Aseta soljetut turvalaitteet verkkopussiin (ei sisälly toimitukseen) ja aseta ne teollisuuspesukoneeseen.
4. Pese kiinnikkeet lämpimässä vedessä käyttäen desinfioivaa saippuaa ja kevyesti ravistaen. Älä käytä valkaisuaainetta.
5. Poista rajoittimet verkkopussista ja ripusta kuivumaan. Älä laita rajoitteita kodin tai kaupalliseen kuivausrumpuun.
6. Kiinnitä puhtaat, kuivat turvalaitteet pelastuspenkkiin luvun ohjeiden mukaisesti

6.3 Rescue-koripaarien desinfiointi ja puhdistus

Pyyhi tai suihkuta kaikki koripaarin ja verkon pinnat desinfiointiaineella.

Noudata desinfiointiaineiden valmistajien ohjeita.

Traverse suosittelee, että tarkastat koripaarit ilmeisten vaurioiden varalta, kun desinfiointi sen.

Puhdista koripaarit ja verkko käsin miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa pyyhkeellä.

TÄRKEÄ

Valkaisuainetta, fenoleja tai jodia sisältävät desinfiointi- ja puhdistusaineet voivat vaurioittaa turvalaitteita ja koripaaria. Desinfiointi ja puhdistus vain tuotteilla, jotka eivät sisällä näitä kemikaaleja..

6.4 Koripaarien tarkastus

Pyydä huoltohenkilöstöä tarkistamaan seuraavat asiat:

- Kaikkien komponenttien tulee olla mukana
- Hitsausliitoksissa ei saa olla halkeamia tai muita murtumisen merkkejä
- Koripaarien rungossa (ylä- ja alakaiteet, kannattimet, kyljet) ei saa olla kolhuja, halkeamia tai tahattomia mutkia
- Polyeteeniverkossa ei saa olla murtumia ja repeämiä, ja se on kiinnitettävä tukevasti alempaan kiskoon.
- Sininen selkätuki on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen
- Varoitustarrojen tulee olla selkeitä ja luettavia, jotta kaikki käyttäjät voivat nähdä ja lukea.
- Turvavyön tulee olla hyvässä kunnossa ilman viiltoja tai kulumia
- Turvasoljissa ei saa olla näkyviä vaurioita, ja niiden tulee toimia kunnolla.

Jos tarkastuksessa havaitaan vaurioita tai liiallista kulumista, poista koripaarit käytöstä, kunnes asianmukaiset korjaukset on suoritettu (katso Korjaus, osat ja huolto, Osa 7).

6.5 Koripaarit säilytys

Varastoi koripaarit kuivassa paikassa. Varmista, että koripaari on puhdas ja kuiva ennen sen sijoittamista varastoon.

7. Korjaus, osat ja huolto

Jos koripaareissa on liiallista kulumista tai halkeamia (joko materiaalissa tai hitsauksissa), on aika poistaa se käytöstä. Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään metalliosia tai hitsauksia.

Jos verkkokalvo, selkätuki, potilaan turvahihnat tai mitkä tahansa tarrat ovat vaurioituneet ja tarvitsevat korjausta, soita jälleenmyyjällesi tai meille, jotta ne vaihdetaan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Osa numero	Kuvaus
05-0102	Täysi selkätuki
05-0104	Jaettu selkätuki
04-0108	Kiinnityshihna

Lisätarvikkeet

Traverse tarjoaa täyden valikoiman lisävarusteita, jotka on hyväksytyt käytettäväksi Titan-sarjan koripaarien kanssa.

Noudata aina lisävarusteiden mukana toimitettuja ohjeita. Säilytä tämän ohjekirjan ohjeet. Huomioi kaikki erityiset näkökohdat (kuormauskorkeudet, ovien korkeudet jne.)

Osa numero	Kuvaus
15-0150	Split-Apart-paarit olkavaljaat
11-2220	Mule II -hiekkapyörä 8-asentoisella kahvalla
05-0144	Traverse Rescue -parien kansi, keltainen
05-0146	Split-Apart Stretcher reppu, sininen
15-0109	Pentueen suitset, Soft Eye

Liittyvät tuotteet

Osa numero	Kuvaus
16-0100	540 ^o ™ Rescue Belay-Large
16-0200	540 ^o ™ Rescue Belay-Small
11-0100A	Titan Tapered Stretcher, SS
11-0104A	Titan-kartiopaarit, SS
19-0100	Traverse Rescue -parit

8. Rajoitettu takuu

Traverse Rescue, LLC (Traverse) rajoitettu takuu sanoo, että kaikilla Traverse-tuotteilla on yhden vuoden takuu alkuperäiselle ostajalle laskun päivämäärästä. Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheet tai virheet. Jos tämän takuun aikana ilmenee tällainen virhe tai vika, ota välittömästi yhteyttä Traverse Rescueen. Traverse Rescue, LLC sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan (valitsemme) viallisen tuotteen. Rajoitettu takuumme ei kata väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, hoidon puutteesta, väärästä käytöstä tai onnettomuuksista johtuvia vahinkoja. Se ei myöskään kata vahinkoa, joka johtuu ostajan korjausyrityksestä, jota Traverse Rescue, LLC ei ole valtuuttanut. Muita takuita ei ole olemassa tai Traverse Rescue, LLC ei anna niitä. Tämä rajoitettu takuu sulkee pois, eikä Traverse ole vastuussa mistään rankaisevista, satunnaisista, erityisistä tai esimerkillisistä vahingot, jotka johtuvat Traversen tai muun myynnin takuun rikkomisesta tai minkä tahansa kolmannen osapuolen osan, tuotteen, palvelun tai järjestelmän suorituskyvystä tai laiminlyönnistä. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita millään tavalla tai muuta millään tavalla Traverse Rescue, LLC:n myymien tuotteiden muiden valmistajien takuita.

9. Traverse Customer Care

Asiakaspalvelu ja tuotetuki ovat tärkeitä ominaisuuksia jokaisessa Traverse-tuotteessa.

Jos tarvitset apua tämän tai minkä tahansa muun Traverse-tuotteen kanssa, ota yhteyttä Traversen asiakaspalveluun.

Pidä Traverse-pelastuspentueesi sarjanumero saatavilla, kun soitat Traversen asiakaspalveluun, ja liitä tämä numero kaikkiin kirjallisiin ilmoituksiin.

Traverse Rescue, LLC.
2715 Bristol Circle, Unit 2
Oakville, Ontario
Canada L6H 6X5

Puhelin905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat) 1 866 998 7866
Faksi905 615 1199
Sähköposti..... info@traverserescue.com
Verkkosivustowww.traverserescue.com



