



Oktober 2023

RESCUE

Redningsbårer



Titan Tapered SS

Titanium Tapered redningsbåre er laget av rustfritt stål. Unik konstruksjon og gjennomtenkt design gjør rammen ekstremt sterk og båren kan håndtere de mest avanserte operasjoner. Materialvalget gjør at båren klarer alle mulige miljøer. Den gjennomgående rørkonstruksjonen gjør at du alltid har et sted å ta tak i båren på en praktisk og ergonomisk måte. Tapered Titanium har fire patenterte StratLoad™ festepunkter som gjør det enkelt og fremfor alt trygt å feste løftestroppen. Bårens innside er føret med et ordenlig nett som gir en høy grad av komfort samtidig som det slipper i gjennom vind og vann. Traverse Redningsbåre har en forventet levetid på 10 år.

Tilbehør:

- TR150106 Løftesele
- TR30C015 Karabinkroker x 4

Art.Nr	TR110100A
Høyde	18 cm
Bredde	58 cm
Lengde	212 cm
Vekt	14 kg
Maks lastekapasitet	1136 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Titan Split-Tapered SS

Titan Split-Tapered har de samme egenskapene som Titan Tapered. En unik mulighet til å dele båren i midten gjør lagring og under transport lettere der plassen er begrenset. Splittbåren settes enkelt sammen og sikres med det unike LocSafe™ trippel låssystemet.

Du klarer enkelt å montere eller demontere båren på 15 sekunder. Titan Split har de patenterte StratLoad™ festpunktene som gjør det enkelt og raskt å feste løftestroppen.

Traverse Redningsbåre har en forventet levetid på 10 år.

Art.Nr	TR110104A
Høyde	19 cm
Bredde	60 cm
Lengde	212 cm
Vekt	15 kg
Maks lastekapasitet	1136 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Redningsbårer



Titan-Ti Tapered Titanium

Titan Ti Tapered redningsbåre er laget av titan med samme sterke design som andre redningsbårer Titanserien. Titan Ti Tapered redningsbåre er spesielt utviklet for avanserte innsatser i alle typer miljøer. Valget av materialer er unik for denne type bårer, og gir en halve vektreduksjon i sammenligning samme modeller av rustfritt stål. Titan Ti Tapered, med patenterte StratLoad™ festpunktene som gjør det enkelt og raskt å feste løftestroppen. Kan også leveres som splittbåre (2-delt). Samme funksjoner som Split-Tapered SS, men produsert i Titan.

Traverse Redningsbåre har en forventet levetid på 10 år.

Art.Nr	TR110118SL
Høyde	18 cm
Bredde	58 cm
Lengde	212 cm
Vekt	6,3 kg
Maks lastekapasitet	1136 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Titan Split Tapered Ti

Titan-seriens redningsbårer er spesialdesignet for å fungere i en teknisk redningsmiljø. Denne redningsbåren er identisk med båren ovenfor bortsett fra det den er delbar. Grunnen til at man ønsker en delbar båre kan være oppbevaring, bevegelse, trangt redningsmiljø eller lignende. LocSafe er en unik funksjon som muliggjør rask og enkel visuell inspeksjon for å sikre at forbindelsene er trygge under hele redningsprosessen. LocSafe lar deg montere enkelt eller demontere båren på ca. 15 sekunder. Redningsbåren har en TIG-sveiset titanrammekonstruksjon 25,4 mm topprør.

- Leveres med fire belter
- Patentert StratLoad™-funksjon som standard
- Slitesterk polyetylenett med høy tetthet (HDPE)
- Meget slitesterk bakplate i UHMW-PE
- Kompatibel med alle våre FERNO-ryggplater.

Art.Nr	TR110119SL
Høyde	19,4 cm
Bredde	60 cm
Lengde	212 cm
Vekt	9 kg
Maks lastekapasitet	11kN/1136 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)



Redningsbårer



Modell 71 Ferno redningsbåre

En av våre bestselgende redningsbårer gjennom tidene. Fordelen med denne typen redningsbåre er at den har en beskyttende kant rundt. Den er lett å håndtere og kan slepes off-road eller trilles med de ulike hjulløsningene som finnes. Nederst er en myk madrass for bedre komfort. Fire belter følger med for å sikre den skadde. Sammen med våre sertifiserte løftestropper F4181 kan den enkelt heises opp og ned.

Også tilgjengelig i delbar versjon F071S.

Tilbehør:

- F071W-V - Hjul for redningsbåre
- F4181 Løftestropper

Art.Nr	F071
Høyde	18 cm
Bredde	61 cm
Lengde	218 cm
Vekt	10 kg
Maks lastekapasitet	272 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Modell 71 Ferno delbar båre

En videreutvikling av en av våre bestselgende redningsbårer gjennom tidene. Ideell for de fleste redningssituasjoner. Model 71S er laget av sterk polyetylen som sammen med en kraftig alumiumsramme gjør den stødig og enkel å håndtere på ujevnt terreng. Fremfor alt, en fordel når du ønsker å være i stand til å gli lett på bakken uten å bli sittende fast.

Den er delbar, så ved hjelp av enkle håndterbare, men sikker kobling, er den svært enkle å transportere. Nederst er en tynn madrass for bedre komfort og som kan enkelt rengjøres. Fire belter er inkludert som, om nødvendig, kan flyttes hvis redningssituasjonen så krever. Ferdige fester for typegodkjent løfestropp (F4181), og er godkjent for løfting med pasient både i vertikal og horisontal retning.

Art.Nr	F071S
Høyde	19cm
Bredde	61 cm
Lengde	218 cm
Vekt	11 kg
Maks lastekapasitet	272 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Advantage

Advantage er utviklingen av tidligere modeller på redningsbårer i plaststrukturer. Den rustfrie stålrammen gir en sterk konstruksjon med en bæreevne på over ett tonn. Utformingen med en frittflytende indre ramme i rustfritt stål gir deg uendelige muligheter til å sikre pasienten basert på hva som kreves av innsats. Den ytre rammen gir deg flere valgmuligheter til å gripe båren på en ergonomisk måte. Liggeflaten er laget av lukket skumplast som gir hygieniske fordeler da den ikke slipper inn væske og er lett å rengjøre, samtidig som at det gir en høy grad av komfort for de som transporteres. Advantage har den patenterte StratLoad™ festepunktene som gjør det enkelt og raskt å feste løftestroppen.

Traverse Redningsbåre har en forventet levetid på 10 år.

Art.Nr	TR110125A
Høyde	19 cm
Bredde	60 cm
Lengde	216 cm
Vekt	15 kg
Maks lastekapasitet	1136 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Armébåre sammenleggbar

En klassisk båre, også kalt en armébåre. Armébårer enkel å bruke med et selvforklarende design som passer perfekt i miljøer hvor du trenger å kunne evakuere. Enkel å oppbevare da den kan brettes både på langs og bredden.


Armébårer er dekket med kraftig nylonbelagt vinyl, som gjør den slitesterk og lett å holde ren og vedlikeholde i ulike miljøer. Sveriges mest solgte båre for industri og idrettsanlegg.

Tilbehør:



- F4312BLACK- Svart belte med plastspenne

Art.Nr	S2108AF206
Høyde	103 cm
Bredde	55 cm
Lengde	206 cm
Vekt	6 kg
Maks lastekapasitet	159 kg

Redningsbårer

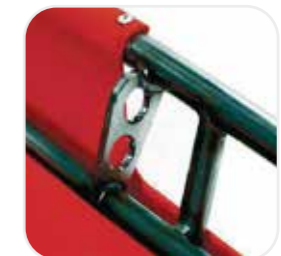

Redningsbårer

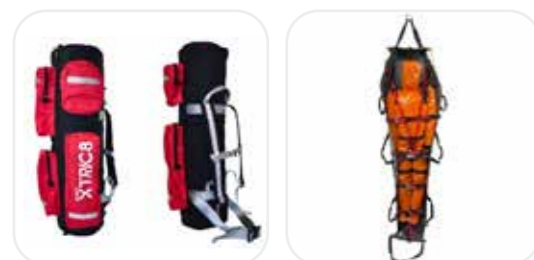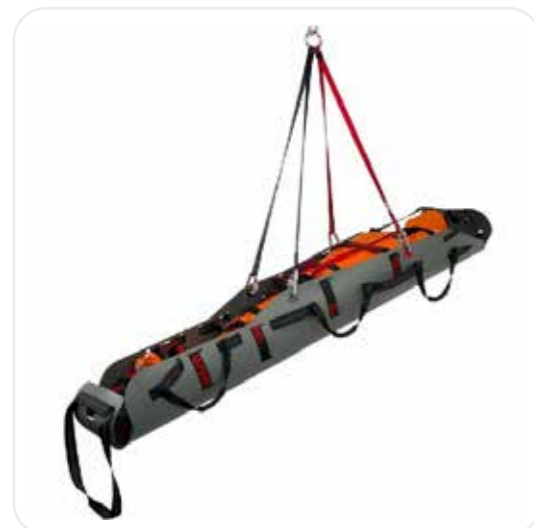

Redningsbåre Ferno XTRIC8

Ferno XTRIC8 er en redningsbåre designet for å trygt pakke og flytte pasienter fra blant annet trange rom i både horisontale og vertikale redningsoperasjoner. XTRIC8 leveres komplett, ferdig i hensiktsmessig sekk/oppbevarings bag med løftestropper. Klar til bruk.

I båren er det inkludert intern pasientsеле for maksimal pasientsikkerhet under vertikale løft, og den fargekodende løftestroppen er forhåndsjustert for rask montering og umiddelbar bruk.

XTRIC8 er ikke ment som en spinal immobiliseringsenhet, men er kompatibel med enheter som stabiliserer og immobiliserer ryggraden som Ferno KED Pro, KED, Ferno XT, Ferno Scoop-bårer og halve ryggradsbrett. XTRIC8 er anvendelig både til løft og til slep, og er det mange kaller en «sked båre».

Art.Nr	FWE-XTRIC8
Bredde	91,4 cm
Lengde	254 cm
Vekt	7 kg (8,5 kg med bag)
Sertifisering	CE,MDR

Redningsbåre Ferno Life Saver

Ferno LifeSaver redningsbåre er en moderne versjon av den klassiske Neil Robertson båre.

Den er designet for enkel, rask og kompakt redning vertikalt. Ferno LifeSaver er laget av moderne materialer, værbestandig plast og nylon.

Det kompakte, opprullede designet gjør den enkelt å lagre og transportere båren.

Art.Nr	FWELS
Høyde	3 cm
Bredde	105 cm
Lengde	163 cm
Vekt	5 kg
Maks lastekapasitet	159 kg



Ferno XT PRO

FERNO® XT PRO er et nyere produkt utviklet for å raskt og trygt evakuere pasienter i trange rom, som fra en kum eller sammenraste bygg, samtidig som de tilbyr immobilisering av nakke og rygg. Ferno XT PRO er basert på samme konsept som Ferno XT. Forskjellen er at Pro er designet for både hode/nakke/ryggbevegelsesbegrensning med mulighet for løfting. Testet i henhold til EN 1498.

Derfor er dette det riktige produktet når du er i et trangt miljø / begrenset plass må du løfte noen helt vertikalt på en sikker måte. Når festepunktet er rett over hodet, kan du enkelt løfte en person ut av kummer og andre trange rom. Dens design og enkelhet betyr at den også brukes av ikke-profesjonelle for redning på arbeidsplasser som industri og byggeplasser. Leveres komplett med løfteslynge.

Art.Nr	F126XTPRO
Høyde	6 cm
Bredde	30 cm
Lengde	83 cm
Vekt	2 kg
Maks lastekapasitet	160 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

Ferno Paraguard Excel

Paraguard Excel redningsbåre er utformet for rask evakuering ved bl. a på byggeplasser, skip og innsats i trange rom. Det solide designet er godt egnet for ulykker med mistenkt ryggskade .


Den skadde er godt beskyttet av omkringsittende design, og alle stroppene er fargekodet . Paraguard Excel pakkes smidig i den medfølgende ryggsekk som er laget for å tåle tøffe ytre faktorer.

Aktuelt tilleggsutstyr:

- Løftestropper
- Bæreseler
- Bærehåndtak

Art.Nr	FGB6092003
Bredde	25 cm
Lengde	182 cm
Vekt	11,5 kg

Redningsbårer

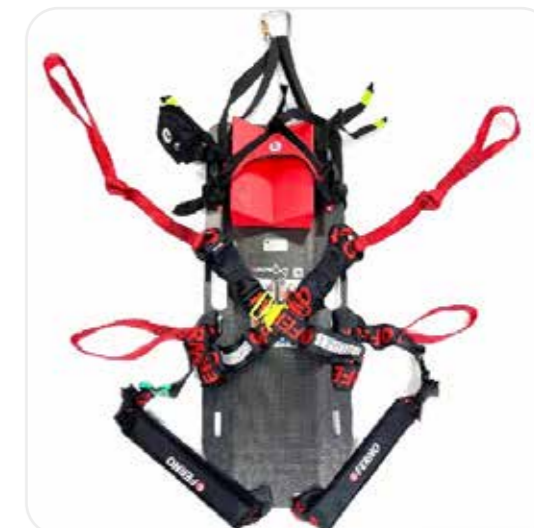

Vannredning



Vannredningsbrett PXB komplett

Pool Extrication Board, PXB er designet spesielt for badevakter for å utføre rask, effektiv og trygg livredning i vann. Det er spesielt effektivt i bassenger hvor en kant ellers kan gjøre det vanskelig å raskt redde en person i nød fra vannet. Oppdriften holder den nødlidende flytende. Stropper og hodeblokker gjør at du enkelt kan immobilisere personen om nødvendig.

Den faste matten på baksiden gir god stabilitet for redningsmenn på kanten av bassenget og er samtidig et godt verktøy for å enkelt og ergonomisk raskt få nødsituasjonen ut av vannet.

Utviklet av Ferno i samarbeid med det Royal Life Saving Society UK.


Art.Nr	FGB10776700
Høyde	4 cm
Bredde	105 cm
Lengde	182 cm
Vekt	10 kg
Maks lastekapasitet	182 kg



Ferno XT Floating

Ferno XT Floating er et lett og praktisk redningsutstyr for evakuering og, om nødvendig, immobilisere en pasient i redning i vann. Den lette konstruksjonen gjør det enkelt å montere på utstyret under kroppen, feste stropper og oppdrifts hjelpemidler med noen få klikk. Deretter kan du enkelt trekke pasienten i land med stropper / løkker på siden. Utstyret kan henges synlig på veggen eller lett pakkes i den medfølgende posen.

Art.Nr	F126XTFLOAT
Høyde	11 cm
Bredde	35 cm
Lengde	120 cm
Vekt	3,3 kg
Maks lastekapasitet	160 kg
Sertifisering	CE iht 93/42/EEC (MDD)

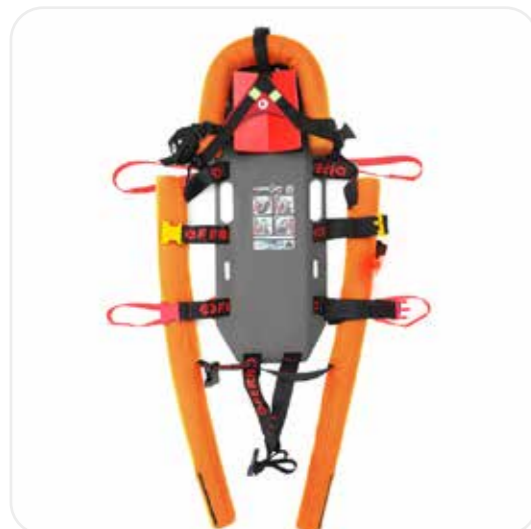

Flytekrage til redningsbåre

Den lette flytekragen fra Traverse Rescue er et godt verktøy når man utøver redning i vann. Det er veldig fleksibelt. Den todelte designen gjør at den er veldig fleksibel, og kan brukes på forskjellige redningsbåre.

Kompatibel med vår Modell 71, Gazelle-serien, Titan-serien og Advantage redningsbåre.

- 29,5 kg oppdrift for å holde pasienten flytende.
- Den flytende kragen kan lagres i eller på båren.
- Materialer i PVC-belagt polyester.

Art.Nr	TR110124A
Høyde	20 cm
Bredde	10 cm
Lengde	130 cm
Vekt	1,4 kg
Sertifisering	MDR



Maritim redningsmadrass

Maritim redningsmadrass er en velprøvd løsning av høy kvalitet for evakuering og forflytning i et maritimt miljø. Maritim redningsmadrass er andre generasjons marine redningsmadrass som nå er et oppdatert og forbedret redningsverktøy. Den opprinnelige modellen har vært brukt i den svenske marinen i over 30 år. Maritim redningsmadrass er et kombinert produkt som muliggjør evakuering i trange omgivelser i marine fartøyer samtidig som den beskytter personen som flyttes.

Maritim redningsmadrass er utstyrt med syv håndtak på begge langsider og tre håndtak i hode- og fotenden. Med mange håndtak kan du enkelt få et godt grep og hjelpe til med støtte og sikre forflytning. Med forbedret oppdriftskapasitet er det også lettere å håndtere en person som trenger bistand i vannet. Maksimal flyte/oppdriftskapasitet 140 kg. Baksiden er forsterket for mindre slitasje.

Art.Nr	GE22201811410
Høyde	6,5 cm
Bredde	103 cm
Lengde	223 cm
Vekt	10,5 kg
Maks lastekapasitet	200 kg, oppdrift 140 kg
Farge	Orange/Sort



Helikopterredning



Redningsbåre SEARBAG III

Searbag III er designet for å redde og transportere en skadet pasient i vanskelige omgivelser. Den kombineres enkelt med Ferno Scoop-båren, Ferno Spineboard eller Ferno vakuummadrass som kan plasseres i Searbag III og deretter løftes ved hjelp av vinsj og/eller tau.

Searbag III er laget i et svært motstandsdyktig stoff, ugjennomtrengelig for 2000 cm³ vann med et trippelbelegg for å unngå slitasje over tid. Undersiden er designet for optimal rive- og slitestyrke for å kunne trekkes over grove eller ujevne overflater. Den er derfor egnet for alle nødsituasjoner og miljøer.

Searbag III er testet i henhold til EASA CS 29.865 a), amdt. III. Den har to EARS anti-rotasjonsseil, ett på hver side for å motvirkerotasjoner forårsaket av helikopterets bevegelse under redningsaksjonen.

Art.Nr	F065SEAR
Bredde	60 cm
Lengde	200 cm
Vekt	5 kg
Maks lastekapasitet	160 kg
Sertifisering	MDD

EARS - Antirotation sail

EARS er designet spesielt for å kontrollere rotasjoner forårsaket av helikopterets bevegelse under redningsoperasjoner. Antirotasjonsseilet minimerer kurvrotasjoner fra helikopteret.

EARS er laget av polyamid med høy styrke og lav porøsitet for å gi større effektivitet under bruk og er raske å sette ut ved å trekke i det integrerte håndtaket.

Ergonomisk grep med integrert håndtak for enkel håndtering under bruk. Åtte surrestropper for universell bruk - kompatibel med hele Fernoserien av redningsbårer.

EARS oppbevares i en integrert lomme og er rask å folde ut.

Art.Nr	F-EARS
Høyde	1 cm
Bredde	43 cm
Lengde	49 cm
Vekt	0,2 kg



Traverse Porter - redningshjul

Porter er løsningen på en stabil båretransport, når pasientene ligger i redningsbåre. Med åtte forskjellige posisjoner for håndtakene kan du enkelt tilpasse deg; gjeldende terreng, antall redningspersonell og skråning.

Universell design kompatibel med alle våre redningsbårer. Porter løser oppgaven din ergonomisk.

Porter gir deg muligheten til å bruke kompatible Ferno/Traverse redningsbårer som «behandlingsbenk» ved sanitetsvakter og lignende.

Art.Nr	TR112224
Høyde	50 cm
Bredde	71 cm
Lengde	95 cm
Vekt	18,5 kg
Maks lastekapasitet	277 kg

TIROL-KIT - redningshjul

Spesialdesignet hjul med titanramme for våre redningsbårer i Titanserien. Hele konstruksjonen gir et svært lett vektsystem som kan demonteres, bæres over lengre avstander og brukes selv til de mest avanserte redningsoperasjoner i vanskelig tilgjengelig terreng. Hele hjulsystemet har en totalvekt på kun 12 kg! Kan også leveres til "Regular".

Tilbehør for å bære båre og Tirolkit på ryggen:




- F102916001 Ryggsele til Titan Split 1 stk.

TIROL-KIT Tapered passer til våre "Tapered" modeller:

- TR110100A Redningsbåre, Ferno Titan SS (stål) Tapered
- TR110104A Redningsbåre, Ferno Titan SS (stål) delbar Tapered
- TR110118SL Redningsbåre, Ferno Titan-Ti (Titan) Tapered titan
- TR110119SL Redningsbåre, Ferno Titan-Ti (Titan) delbar, Tapered titan

Art.Nr	TR2100034/35
Høyde	128 cm med båre
Bredde	61 cm med måre
Lengde	232 cm
Vekt	12 kg
Maks lastekapasitet	225 kg

Redningshjul

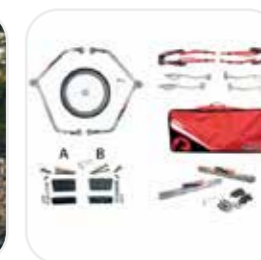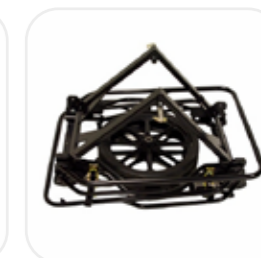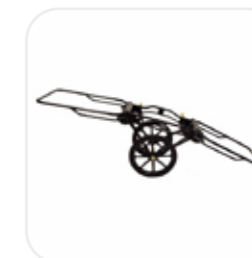



Ferno M71/M71S hjulkit

Å kunne feste hjul på redningsbærer er en funksjon som settes pris på av alle som jobber med redningsoppdrag ute i terrenget. Nå kan du enkelt frakte redningsbåren i vanskeligere terreng og over lengre avstander.

Redningshjulene kan festes til fotenden av våre redningsbærer, F071 og F071S, med noen få enkle grep. De grove dekkene på 25 cm gir en jevn tur selv i humpete terreng. Hjulsettet festes til fotdelen av redningsbåren med fire hurtigfester.

Art.Nr	F071W-V
Høyde	32 cm
Bredde	68 cm
Lengde	60 cm
Vekt	5,1 kg
Maks lastekapasitet	280 kg

Mule II - Redningshjul

Mule II Litter Wheel er designet for å være universell for alle typer redningsbærer med "karm". 2 - 3 personer håndterer Mule II på en trygg og funksjonell måte. Håndtaket har 8 forskjellige posisjoner. Enkel å montere og bruke. Stort ATV hjul gjør at den er perfekt for å håndtere mer utfordrende miljø. Lastetropper festes med enkle grep på fire punkter og strammes til. Båren vil hele tiden ligge stødig og sikkert på Mule II Litter Wheel og gi pasienten en trygg opplevelse av transportetappen.

- Enkel å bruke og enkel å montere.
- Ideell for alle typer terreng og forhold.
- Raskt å feste båren.
- Høy lastekapasitet på hele 227kg.

Art.Nr	TR112220
Høyde	74 cm
Bredde	70 cm
Lengde	244 cm
Vekt	21 kg
Maks lastekapasitet	227 kg



Vacuumsplint Rescue Lite full body

Rescue Lite Full Body Splint er utviklet sammen med fjellredningspersonell. Å kunne komme seg rundt i vanskelig terreng og kunne gi den beste omsorgen på stedet stiller høye krav til et produkt.

Lav vekt, for å kunne bæres enkelt, passe sammen med annet redningsutstyr, være ergonomisk for brukere og trygt for pasienten! Denne splinten sikrer hele kroppen og er et populært valg i tjenester hvor det kan være behov for immobilisering.

Denne kroppssplinten brukes gjerne sammen med redningsbærer og pulk.

Art.Nr	GE23271513001
Høyde	4 cm
Bredde	131 cm
Lengde	200 cm
Vekt	6 kg
Maks lastekapasitet	220 kg



Vakuummadrass EasyFix Plus II

EasyFix PLUS II har en unik design som gir økt støtte for hode, nakke og rygg uten bruk av nakkekrage på pasienten. Den unike designen letter også håndteringen av luftveiene til en pasient med begrenset mobilitet. Til tross for dette har emballasjens volum og vekt redusert med 20% sammenlignet med de fleste tradisjonelle systemer.

Den øvre delen av EasyFix PLUS har en forsterket bunnplate som dekker bekkenet. En unik løsning hvor omslag sammen med festestropper gir bedre støtte enn tradisjonelle systemer. Utviklingen av dette systemet er basert på funksjonene til X-spindelen der det er vist at kryssfiksering gir klare fordeler.

1 flexslide overføringslaken er inkludert i hver vakuummadrass for å lette fjerning

Art.Nr	GE23271511001
Høyde	4,5 cm
Bredde	130/72 cm
Lengde	208 cm
Vekt	8,7/10,5 kg
Maks lastekapasitet	250 kg





Vakuumsplintsett Ferno

Komplett sett med tre spljelker, fullt ben, arm/underben og arm. Et komplett sett består av spljelker, veske, pumpe og reparasjonssett. Skinnen danner seg rundt arm og ben og gir optimal og komfortabel støtte.

Slitesterkt PVC-stoff gjør skinnene holdbare og enkle å rengjøre. Alle sømmer er sveiset for best hygiene.

Spljelkene holder vakuum i minst 15 timer og er røntgengjennomtrengelige.

Art.Nr	GEAS190
Høyde	3 2cm (veske)
Lengde	82 cm (veske)
Vekt	4,3 kg

Ferno Scoop® EXL

SCOOP® EXL er uten tvil vårt mest populære immobiliseringsprodukt. Man kan både scoope pasienten i båren, samtidig som man sørger for immobilisering av pasienten. Den unike TSL-låsen som er to låser i ett, både i fot og i hodeende, trykker deg i en sikker håndtering av pasient når han eller hun først ligger i scoopbåren. Det ergonomiske håndtaket gjør Scoop® EXL overlegen.

Scoop® EXL kan brukes i røntgen, CT så vel som inne i MR-undersøkelserommet. Denne åpningen brukes fordelaktig til også å kutte klær i fast stilling og tillater bruk av 4-punkts beltet på båren under transport. Scoop® EXL kan deles i bredden, men også foldes på langs, noe som gjør den fleksibel når den lagres. Scoop EXL er av de mest foretrukne på markedet, og sammen med et extenderkit (tilbehør) er den helt unik både i størrelse og bruk.

Art.Nr	F065EXL
Høyde	8 cm
Bredde	43 cm
Lengde	165-201 cm
Vekt	8 kg

Maks lastekapasitet 227 kg

Easy Lift skuldersele

Easy Lift Skulder er et nytviklet hjelpemiddel som avlastar hender og armer mens man bærer en bære. Easy Lift er enkel å bruke og har unike funksjoner som gjør denne til framtidens bæresele. Easy Lift har friksjonslås som gir både et stødig grep, samtidig som du raskt kan frigjøre deg om det oppstår en uventet situasjon.

- Lett å bruke, lett å forstå.
- Fordeler belastningen.
- Umiddelbar utkobling ved uventede hendelser.

Art.Nr	GE1500000016
Vekt	400 g

Minitranz forflytningsbære

MINITRANZ er et utmerket verktøy for å flytte pasienter opp fra gulv eller lukkede rom hvor det ellers er vanskelig å få tilgang. To håndtak på hodeenden gjør det enkelt å dra pasienten.

Undersiden forsterket med glassfiberoverflate som våre akutt- og forflytningsmadrasser!

- Klarer 250 kg belastning.
- Lett å rengjøre.
- Sveisede sømmer.
- Får plass under/på akuttmadrassen.

Art.Nr	GE70050
Høyde	1,5 cm
Bredde	76 cm
Lengde	136 cm
Vekt	1,8 g
Maks lastekapasitet	250 kg



Tilbehør



Trekk til hel redningsbåre

Travers båretrekk beskytter redningsbåren din mot ytre miljøpåvirkninger. Den er designet med god plass til oppbevaring av tepper og annet båretilbehør og leveres med 6 forsterkede bærehåndtak og to spennstropper. Passer de fleste av våre redningsbårer.

Art.Nr TR05144



Trekk til delbar redningsbåre

Passer de fleste av våre delbare redningsbårer.

Art.Nr TR050145



Trekk til redningsbåre F071

Passer de fleste av våre redningsbårer.

Art.Nr F387A



S-Cut 501

Skjæreverktøyet S-CUT er spesielt utviklet for å raskt kunne ta av tekstiler, skjære remmer og lærbelter, som for eksempel å raskt komme til sår eller bruddskader på en skadd pasient i mc-dress eller kappe sikkerhetsbelte. Den kan også brukes på den akutt syke pasienten.

Målet er raskt å fjerne klær fra skader uten å behøve å endre leiet til den skadde eller syke pasienten og dermed risikere ytterligere skader eller unødvendig smerte. Skjærebladet er innebygget og utformet slik at man forhindrer skader på brukeren og pasienten.

Art.Nr 5097090

Farge Rød

Bredde 2,4 cm

Lengde 23,9 cm



Tilbehør

Kigali ryggsekk

Opprinnelig designet for skipatrujer har Kigali ryggsekkene fort bli populær i SAR, politi og ambulanse. Med to forskjellige størrelser å velge mellom er Kigali egnet til nesten enhver situasjon. Hver ryggsekk er lik med hensyn til layout, og inkluderer to utvendige lommer med doble elastiske stropper og lommer til å organisere små ting.

Det store hovedrom har ekstra plass for bandasjer. Har nok plass til en ventilasjonsbag, små tepper og bandasjer.


Fåes i 2 størrelser; 35 liter og 45 liter.

Art.Nr TR200035/TR200045

Lengde / Bredde / Høyde 33/53,5 cm/38/58,5 cm

Vekt 1,8 g

Litervolum 35 eller 45 liter

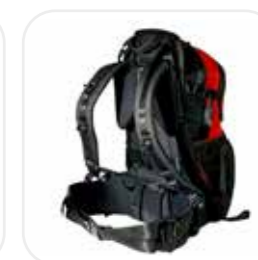

Rumpetaske Travers

En smidig rumpetaske med en diskret design som rommer det meste takket være sine smarte lommer. Brukes mye av skipatrujer og andre utrykningsetater. Tasken leveres tom, men kan kompletteres med utstyr. Rumpetasken har to forskjellige størrelser å velge mellom.

Polstret rundt hoften.
Små lommer i båndet.

Tilleggsutstyr:

- TR200090 Polstret skulderstopper

Art.Nr TR200070BK/TR200080BK

Høyde 22,9 cm

Bredde 7,6 cm

Lengde 35,5 cm





Ryggsele for Titan Split bærer

Ryggsele for delbare bærer er et enkelt, lett system for å bære delbare redningsbærer i terreng. Selen er laget av vinylbelagt polyesterstoff/mesh og inkluderer sidespenner i plast og polstrede skulder- og midjetropper.


Art.Nr F102916001

Ryggsekk til delbar redningsbære

Ryggsekken er designet for å bære og beskytte en delbar redningsbære. Sekken har mye ca volum til også å frakte annet nødvendig redningsutstyr.

Fullt justerbare, konturerte og polstrede skulder- og hoftetropper pluss en rekke alternativer bærehåndtak. En kraftig, dobbel kjede gir enkel tilgang innvendig for lasting og lossing av utstyret.

Et beskyttende fôr og polstring for ekstra komfort og beskyttelse.

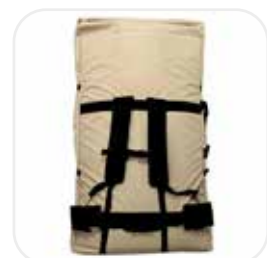

Art.Nr TR050146-TAN

Høyde 19 cm

Bredde 60 cm

Dybde 28 cm

Pasientbeskyttelse

Ferno pasientbeskyttelse beskytter pasienten mot regn, vind, sludd og snø samtidig som den gir enkel tilgang gjennom den doble glidelåsen i midten for å overvåke pasienten tilstand eller medisinsk behandling.

Laget av lett nylon, har dekselet en dobbel glidelås som åpnes fra begge sider endene for å få tilgang til pasient eller utstyr. Pasienttrekket kan ruller eller brettes og oppbevart i sin selvforsynte oppbevaringspose som enkelt kan festes til båret med den integrerte borrelåsbånd.

Universell design gjør den kompatibel med alle våre redningsbærer. Oppbevares enkelt på redningsbåren. Beskytter pasienten mot regn og vind.

Art.Nr TR150130

Bredde 119 cm

Lengde 241 cm

Vekt 0,45 kg

Materiale Nylon



Rescue pillow

Rescue Pillow er en praktisk pute som passer perfekt i redningsbærer.

Puten har en dobbelt funksjon med sin hygieniske, men myk pose som fungerer som en pute. Tar du innholdet ut har du et varm fleeceteppe for nedkjølte pasienter.

Art.Nr TR700YP





Vi i Ferno Norden har siden 1983 jobbet tett og utvikletsamarbeid med våre kunder. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav til sikkerhet, kvalitet og funksjonalitet.

Våre primærkunder er ambulansetjenesten, redningstjenesten, politiet, sivilforsvaret og Forsvaret. I dag vokser vi også i industri, offentlige miljøer, helseinstitusjoner og det private markedet.

Selskapet er ISO-sertifisert i miljø 14001:2015 og i kvalitet 9001:2015.



Vårt bærekraftsarbeid: *Sammen gjør vi en forskjell!*

Vårt bærekraftsarbeid følger og er basert på FNs Agenda 2030, som består av 17 globale mål for bærekraftig utvikling som tar sikte på å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og skape fredelige og trygge samfunn.



FNs BÆREKRAFTSMÅL



+47 33 03 45 00
fna@fernonorden.com
www.fernonorden.no



+45 43 62 43 16
fas@fernonorden.com
www.fernonorden.dk



+46 520 420 200
fab@fernonorden.com
www.fernonorden.se



+358 (0) 29 1700 454
foy@fernonorden.com
www.fernonorden.fi