

Pasientforflytning



Pasientforflytning er Ferno Nordens kjernevirksomhet. Vi har i over 60 år globalt utviklet og produsert utstyr i nært samarbeid med våre brukere.

Ambulansbårer:

En ambulansbåre er midtpunktet rundt det aller meste av behandling i en ambulanse, og er et verktøy som vil gjøre hverdagen enklere for personell innen de prehospitaltjenester. Sikkerhet, ergonomi, hygiene og fleksibilitet er viktig. Alt fra nyfødte til bariatriske pasienter skal kunne håndteres under verdige og trygge forhold. Hvilken bæremodell passer din virksomhet?

Bærestoler / Trappstoler:

I dag har nesten alle virksomheter en bærestol / trappestol i ambulansen. Utviklingen skjer hele tiden og kapasiteten øker. Sammenleggbare, uttrekkbare håndtak, side armlener, larveføtter, elektriske larveføtter, avtakbare larveføtter, lagring, vekt? Ja, det er mange spørsmål, og alternativene er mange. Vi hos Ferno Norden har et stort fokus på ergonomiske løsninger, og vi har flere modeller å velge mellom. Hvilken modell passer deg?

Akuttmadrasser:

En akuttmadrass (transportmadrass) er ikke bare "en madrass", men en egen enhet definert i EN-1865, som er standarden for bæremateriell. Hygienisk, holdbar med flere håndtak for løfting, må tåle minst 150 kilo, komfort på pasientsiden og ha en struktur for forflytning. Den må tåle temperaturer fra -30°C til +70°C. Madrassen skal også være røntgengjennomtrengelig. Våre akuttmadrasser har i tillegg til alle disse kravene også et skum innvendig for maksimal komfort, og brukes daglig sammen med vårt trinnvise tilbehør som bidrar til gode ergonomiske løsninger for personellet. Hvilken madrassmodell passer ditt behov?

Ergonomisk tilbehør:

Pasientforflytning kan høres enkelt ut, men er en daglig oppgave som må løses så ergonomisk som mulig, hygienisk og fleksibelt. En vellykket pasientforflytning er avhengig av hjelpen rundt ambulansbåren, og i dag tar vi oftere pasienten til båren i stedet for å flytte båren til pasienten. Vurder ditt behov for ergonomisk tilbehør for å gjøre denne prosessen tryggere og enklere.

Spesialtransporter:

Kuvøser, barntransport, intensivtransport, transport av en bevegelses-begrenset pasient. Ja, det er mange utfordringer som må løses i de prehospitaltjenester. Ta gjerne en titt på løsningene våre, mangler du noe?


Bariatriske transporter:

Vårt bariatriske transportprogram er spesielt utviklet for å håndtere utfordringene som kommer med transport av overvektige pasienter. Våre løsninger gir en sikker og ergonomisk transportopplevelse.

Ferno VIPER POWER + Ferno VLS

Ferno VIPER er en elektrisk bæreøsning som kombinerer europeisk design med globale funksjoner. Brukervennlighet, pålitelighet og funksjon sammen gjør Ferno VIPER til en nordisk favoritt når det gjelder elektriske bærer. Med en lastekapasitet på så mye som 320 kilo i kombinasjon med Fernos side armlener, får du en bære som kan håndtere selv de litt større pasienter. Ferno VIPER er lett å lære, lett å håndtere, lett å laste inn og ut av ambulansen, og til tross for sin høye lastekapasitet kan den enkelt betjenes på trange steder. VIPER er en stabil bære som står/ruller jevnt selv i sin høyeste posisjon. **Ferno VLS** er et letthåndterlig og fleksibelt system som lar deg laste baren fra forskjellige vinkler og høyder på under 20 sekunder. VLS vil automatisk midtstille baren før lasting. VLS er et av de letteste systemene på markedet, noe som gir en lavere totalvekt i ambulansen.

Art.Nr	F1000
Høyde	38-130 cm
Bredde	60 cm
Lengde	160-200 cm
Vekt	82 kg
Maks kapasitet	320 kg
Sertifisering	CE, EN1789,EN1865

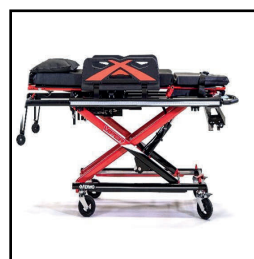

Ferno POWERX™

PowerX er vår beste løsning i det vi kaller "X-Frame" eller X-ramme, som er et kraftig bæreøsning med opptil 400 kilo lastekapasitet! PowerX er utviklet for kjøretøy med løfterampe / løfteluke / bakløfter. De 4 delene av "push-poles" gjør baren veldig enkel å manøvrere og gir en ergonomisk fordelaktig håndtering. PowerX er konsekvent designet med god hygiene i tankene, rene linjer som er enkle å tørke av og inkluderer biosafe pasientbelter og biosafe madrass (antibakteriell overflate).

PowerX er en favoritt når det gjelder spesielle transporter med kuvøse, intensiv-pasienter og med bariatriske pasienter.

Art.Nr	FGB3000
Høyde	48-88 cm
Bredde	57 cm
Lengde	145-193 cm
Vekt	67 kg
Maks kapasitet	400 kg lavest pos./350 kg
Sertifisering	CE, EN1789,EN1865





Ferno F3 Monoblock

Ambulansebåren Ferno F3 er en robust og praktisk bære designet forenklet håndtering. Tydelige funksjoner med praktiske håndtak gjør at du raskt lærer å håndtere båren. Ferno F3 kan justeres til flere forskjellige høyder for enkel lasting og lossing. De store 200 mm hjulene gir deg god manøvrering selv på ujevnt underlag. Alle 4 hjulene kan frikobles for lettere å snu båren 360 grader på trange steder. To av hjulene kan låses i retning slik at båren kan ruller under kontroll av én person. Ferno F3 tåler en belastning på 250 kg. Sjøkkstilling, knestilling og 8-trinns ryggstøtte gjør at båren kan tilpasses etter behov. Solide sidearmleener som enkelt kan felles opp eller ned og infusjonsholder er funksjoner som er inkludert. Ambulansebåren Ferno F3 leveres komplett med belter og en svart madrass.

Ekstrauststyr: F520090 Bårelås for FERNO F3

Art.Nr	F521031
Høyde	32-86 cm
Bredde	56 cm
Lengde	195 cm
Vekt	45 kg
Maks kapasitet	250 kg
Sertifisering	Class1 MDR 2017/745/EU., EN1789 EN1865-1

Ferno Mondial Monoblock

Ferno Mondial® Monblock er en ambulansebåre bygget med "smartload teknologi". En teknologi som vil gjøre arbeidet ditt jevnere, enklere og ikke minst mer ergonomisk i forbindelse med lasting og lossing av båren inn og ut av kjøretøyet. Mondial® EZ-lastesystemet utløser mekanismen til de uavhengige beina automatisk i forbindelse med lasting. Dette gir enkel lasting og lossing samtidig som båren alltid støtter pasientens vekt. Ferno Mondial® Monblock har en EZ-Pull-utløsermekanisme som reduserer belastningen på håndleddene og gjør at kroppen får en god ergonomi i forbindelse med heving eller senking av båren.

Ferno Mondial® Monblock er tilgjengelig i to versjoner/høyder:
F2964-02 Lastehøyde 67-73 cm
F2970-02 Lastehøyde 73-79 cm



Art.Nr	F2964-02/F2970-02
Høyde	31-100 cm
Bredde	55 cm
Lengde	197 cm
Vekt	45 kg
Lastehøyde	67-73 cm/79-79 cm
Maks kapasitet	250 kg
Sertifisering	Class1 MDR 2017/745/EU., EN1789 EN1865-1

PacRac™+ Intraxx IVA-plattform

Pac Rac + IVA-plattform for ekstra utstyr under transport opp til totalt 25 kg. Pac Rac + ICU Platform har Intraxx-profiler for enkel og sikker hurtigkobling med intraxx-montering, to integrerte infusjonsholdere og svingbare sidevegger, slik at pasientene kan flyttes fra seng til bære uten å fjerne Pac Rac + fra båret.

Pac Rac + IVA-Plattform kan enkelt foldes flatt for lagring i ambulansen. Pac Rac+ festes til fotenden av båret på de fleste Ferno bærer. PacRac+ er laget av pulverlakkert aluminium og er enkel, holdbar og enkel å rengjøre.

Mål sammenlagt 12x53x56 cm

Art.Nr	F8034
Høyde	56 cm
Bredde	53 cm
Dybde	42 cm
Vekt	7,2 kg
Maks kapasitet	25 kg
Sertifisering	CN, EN1789



Easy Trans intensivrack

Easy Trans intensivplattform er designet for å transportere alvorlig syke pasienter trygt uten å bevege seg og med utstyrets tilknytning til ambulansen. Pasienten kan kobles til utstyret fra punkt A til punkt B.

Plattformen er tilpasset eget utstyr. Eksternt utstyr montert på plattformen har lov til å veie maksimalt 20 kg.

Plattformen festes til fotenden av ambulanserbåret.

Easytrans kan tilpasses alle Ferno sine bærer.

Art.Nr	5009313
Høyde	83 cm
Bredde	61 cm
Lengde	64 cm
Vekt	9,7 kg
Maks kapasitet	20 kg eksternt utrustning
Sertifisering	CN, EN1789



UNI-ClipDoc System™

UNI-ClipDoc-systemet™ ble utviklet for å skape sømløse pasientoverføringer mellom bakke- og lufttransport. Dette unikt utformede grensesnittet gjør det mulig å overføre pasientbærende plattformer som LifePort, AeroSled og inkubatorer direkte fra flyet til ambulansen. UNI-ClipDoc-systemet™ speiler fly-/helikoptergulvet, noe som gir en jevn og sikker pasienthåndteringsprosess. Ansatte som håndterer overføring av pasienter vil sette pris på viktigheten av å gjøre hver overføring så enkel og skånsom som mulig. Mellom bakke- og luft transport er FERNOs UNI-ClipDoc-system™ løsningen.

Rask og enkel montering av 2-delt design.
Pakket i bæresvesker. Testet og godkjent i henhold til EN 1789.

Art.Nr	FGB031379000
Høyde	20,5 cm
Bredde	58,5 cm
Lengde	195,5 cm
Vekt	32,3 kg
Maks kapasitet	Avgjør av aktuell bæremodell
Sertifisering	CN, EN1789



Vakuumpute MRP

Vakuumputen MRP er en pute som er utviklet i samarbeid med ambulansetjenesten for å gi en komfortabel, praktisk og hygienisk løsning som kan brukes til å begrense bevegelse under transport på ambulansébårer. Økt stabilitet i hodet og nakken er ofte ønskelig i mange forskjellige situasjoner som inkluderer traumer, hjerneslag, pasienter med bevissthetssenkning og intuberte pasienter, blant andre.

Form puten etter ønske og evakuer luften enkelt i MRP med vakuumpumpen vår kjøpt separat (GEAS160).

- Høy komfort
- Enkel å bruke
- Lett å rengjøre
- Individuell tilpasning

Art.Nr	GE1500000114
Bredde	8 cm
Lengde	34 cm
Vekt	700 g
Sertifisering	CE

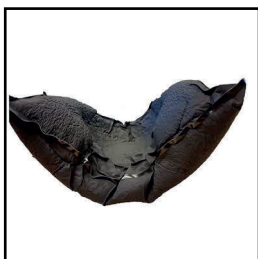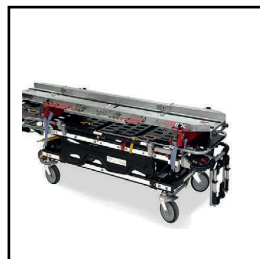

Akuttmadrass UNI Standard

UNI akuttmadrass er en trygg, hygienisk og ergonomisk universalmadrass som passer de fleste ambulans bårer på markedet. UNI akuttmadrass testes og utvikles sammen med nordisk ambulanspersonell med høye krav til hygiene, sikkerhet, ergonomi og komfort. Akuttmadrassen har høyere krav en «vanlig» madrass når det gjelder funksjon og hygiene.

- Puten kan brettes vekk hvis du ønsker en bedre vinkel for intubasjon.
- Store hull for enkelt å flytte bårens belter inn og ut ved overføring
- For maksimal komfort er innsiden fordelt med 15 mm sensus - minneskum og 45 mm komfortskum
- Innsiden av Akuttmadrassen har en skjult V-formasjon som gir ekstra støtte og komfort for pasienten
- Testet og utviklet for å fungere med Step by Step GE1500000117
- Testet i henhold til: EN 1865

Art.Nr GE24271030000

Høyde 6 cm


Bredde 50 cm

Lengde 185 cm

Vekt 4,7 kg

Maks kapasitet 250 kg

Sertifisering CE, MDR 2017/745

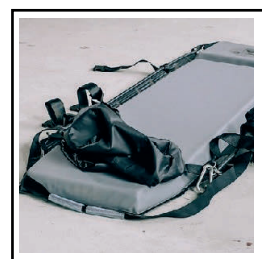

Akuttmadrass UNI Komfort

UNI Komfort madrass er produsert med ekstra skum og dermed bedret komfort. UNI Akuttmadrass er en trygg, hygienisk og ergonomisk universalmadrass som passer de fleste ambulans bårer på markedet. UNI Akuttmadrass testes og utvikles sammen med nordisk ambulanspersonell med høye krav til hygiene, sikkerhet, ergonomi og komfort. Akuttmadrassen har høyere krav enn en "vanlig" madrass når det gjelder funksjon og hygiene.

- Puten kan brettes bort hvis du vil ha en bedre vinkel når du intuberer.
- Store hull for enkelt å flytte bårerbelter inn og ut når du beveger deg.
- Bedre komfort, 25 mm sensus-minneskum og 65 mm komfortskum
- Innsiden av akuttmadrassen har en skjult V-formasjon som gir ekstra støtte og komfort for pasienten • Testet og utviklet for å fungere med Step by Step GE1500000117
- V-formet fotende som passer til alle bårermodeller

Art.Nr GE24271030003

Høyde 10 cm


Bredde 50 cm

Lengde 185 cm


Vekt 5,2 kg

Maks kapasitet 250 kg

Sertifisering CE, MDR 2017/745

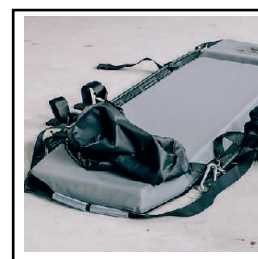

FAST-stol manuell

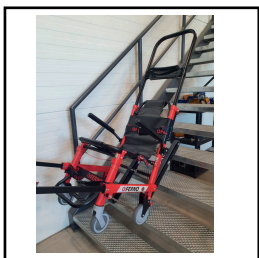

FAST er den mest fleksible serien av stoler for enkel og ergonomisk pasienthåndtering. FAST har en sterk konstruksjon og kan lastes med opptil 250 kg. Denne stolen med manuelle larveføtter glir ned trapper og man unngår tunge løft. Stolen er utstyrt med store svinghjul foran og faste bakhjul, noe som gjør det enkelt å manøvrere i alle miljøer. For best mulig ergonomi kan FAST tilpasses lengden på forskjellige operatører. Det hygieniske vinylsetet er forhøyet bak ryggen, noe som gjør det behagelig å sitte på. Den manuelle stolen er tilgjengelig i to modeller:


F05610 Faste larveføtter

F05620 Avtagbare larveføtter. Avtagbare larveføtter kan være egnet hvis du skal bruke stolen til manuell bæring.

Kollisjonstestet veggmontering er tilgjengelig som tilbehør for å feste stolen sikkert til kjøretøyet. (Art.nr. F05690)

Art.Nr	F05610/F05620
Høyde	100-158 cm
Bredde	54,5 cm
Lengde	69,5 cm
Vekt	15 kg/11,2 kg
Maks kapasitet	250 kg
Sertifisering	CE, EN1865

FAST-stol PowerTraxx

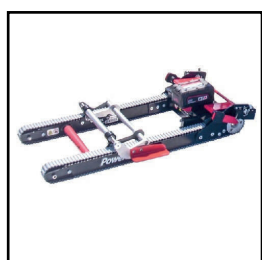

Dersom du har behov for transport opp i tillegg til ned trapper, er en elektrisk trappestol den beste ergonomiske løsningen. Med den sterke men lille motoren - tar du deg trygt og kontrollert begge veier. Batteriet er ladbart, og varer hele dagen - nesten uansett hvor mange trapper du skal transportere dine pasienter. Stolen kan benyttes med pasient som veier inntil 227 kg. Stolen er lett å manøvrere i alle miljøer. For best mulig ergonomi kan FAST tilpasses lengden på forskjellige operatører. Det hygieniske vinylsetet er forhøyet bak ryggen, noe som gjør det behagelig å sitte på. Kollisjonstestet veggmontering er tilgjengelig som tilbehør for å feste stolen sikkert til kjøretøyet. (Art.nr. F05690)

Art.Nr	F05630
Høyde	100-158 cm
Bredde	51,6 cm
Lengde	65,5 cm
Vekt	25 kg
Maks kapasitet	227 kg
Sertifisering	CE, EN1865

Transcend™ Stair Chair

Vår nye Transcend™ Traxx gir operatører og pasienter en trygg og sikker transport opp eller ned trapper. Transcend™ Traxx er i stand til å håndtere pasientbelastninger opptil 250 kg. 5" dreibare hjul foran og 8" bakhjul med integrerte støtabsorberende dekk som du enkelt kan navigere i ulendt terreng. Transcend™ Traxx tar liten plass når den er foldet sammen og ingen deler stikker ut som kan sette seg fast ved inn- og uttak (Mål brettet: 91,2 x 50,7 x 20 cm). I sammenslått posisjon er stolen låst slik at den kan håndteres enkelt uten at den folder seg ut av seg selv. De uttrekkbare bakre bærehåndtakene har en unik vinkel for å gi en bedre ergonomisk posisjon ved håndtering og bæring av stolen. Trappestolen er manuell og glir lett ned trapper slik at du ikke trenger å bære pasienten.


Art.Nr	F0731402
Høyde	151,8 / 90,8 cm
Bredde	50,5 cm
Dybde	76/135 cm
Vekt	14,7 kg
Maks kapasitet	250 kg
Sertifisering	CE, EN1865



Transcend™ PowerTraxx®

Vår helt nye Transcend™ PowerTraxx® gir operatører og pasienter maksimal sikkerhet og kraft når de transporterer opp eller ned trapper. Transcend™ PowerTraxx har elektisk motor som driver larveføttene og kan håndtere pasientbelastninger på opptil 250 kg. Batteriet har en stor kapasitet og kan uten problemer brukes i 40 trapper opp og ned i gjennomsnitt. 5" svinghjul foran og 8" bakhjul med integrert støtabsorberende dekk som du enkelt kan navigere i ulendt terreng. Transcend™ PowerTraxx® tar liten plass når den er sammenfoldet og ingen deler stikker ut som kan sette seg fast i inn og uttak (Dimensjoner brettet: 91,2 x 50,7 x 20 cm). I sammenslått posisjon er stolen låst slik at den kan håndteres enkelt uten at den folder seg ut av seg selv.

Art.Nr	F0731402
Høyde	151,8-90,8 cm
Bredde	50,5 cm
Dybde	76/135 cm cm
Vekt	14,7 kg
Maks kapasitet	250 kg
Sertifisering	CE, EN1865

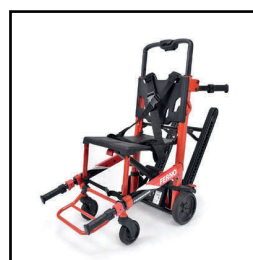

Ferno Compact 2 Track



Fernos Compact 2 Track kombinerer det beste fra begge verdener. Compact 2 Track er en utvikling av vår svært populære bærestol Compact 2. For å redusere bæringen til et minimum, klikker du bare på larverføttene, og så har du en trappestol som enkelt glir ned trappen. Den store fordelene er at du kan velge om du vil ha en bærestol eller en trappestol ut fra situasjonen. Håndtaket gir deg bedre ergonomi, og du får litt avstand til pasientens hode.

På håndtaket er en komfortabel hodepute for pasienten som forhindrer at hodet faller bakover. Her har du en perfekt kombinert stol som sørger for en jevn og pålitelig pasientforflytning i enhver situasjon.

Art.Nr FGB071481450

Høyde 106-139 cm

Bredde 45 cm

Lengde 60 cm

Vekt 15 kg

Maks kapasitet 200 kg

Sertifisering CE, EN1865

Ferno Compact 2

Compact 2 er designet for smidig og hurtig bruk, for eksempel ved evakuering. Bærestolen, eller båretolen, foldes ut i en bevegelse, 2 sikkerhetsringer faller på plass og sikrer at stolen er oppslått. Stolen har et sikkert og godt grep for operatørene. Produsert i rustfritt stål.



Art.Nr FGBAC3019

Høyde 93 cm

Bredde 44,5 cm

Dybde 76/135 cm cm

Vekt 14,7 kg

Maks kapasitet 250 kg

Sertifisering CE, EN1865

Ferno S242 bærestol

S242 er en veldig praktisk, enkel og populær bærestol. Teleskop håndtak i foten og doble håndtak på baksiden gir flere muligheter for vanskelige løft.

Dette er en enklere modell uten larverfotter for de som ønsker en praktisk bærestol og et godt verktøy ved forflytning.

Vinylbelagt sete som er hygienisk og lett å rengjøre.



Art.Nr	S242
Høyde	91,5 cm
Bredde	52 cm
Lengde	121 cm
Vekt	10 kg
Maks kapasitet	159 kg
Sertifisering	CE, EN1865


Veggfeste for FAST stoler

FAST Chair Veggbrakett - designet for å holde FAST Chair sikkert i både statisk eller dynamisk bruk.

Enhåndsfrigjøring muliggjør rask feste eller løsning av stolen.


Passer alle Ferno FAST stoler. Krasjtestet i 10G i henhold til EN 1789

Art.Nr	F05690
Høyde	87,7 cm
Bredde	46,8 cm
Vekt	2,4 kg

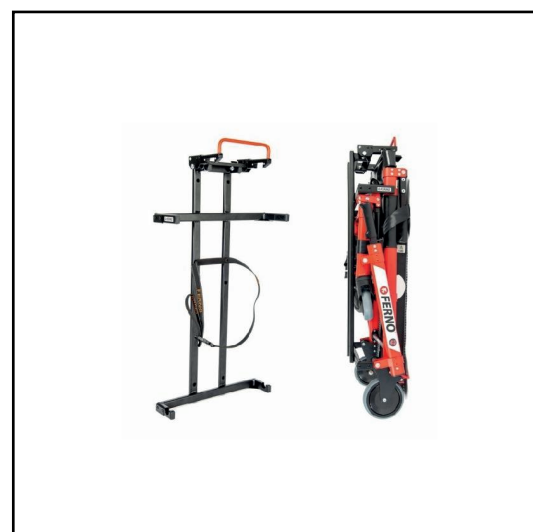

Kangoofix

Kangoofix er et innovativt og patentert beltesystem som er utviklet for å sikre trygg transport av nyfødte babyer i ambulanser. Designet med tanke på å beskytte både barnet, foreldrene og helsepersonellet, gir Kangoofix en trygg og sikker måte å feste babyen under transport. Systemet er utviklet for å sikre at alle kan være forsvarlig festet under transporten, og har gjennomgått medisinske felttester og dynamiske kollisjonstester (10 og 20G). Kangoofix brukes ofte som et supplement i nyfødtomsorgen for transport av stabile barn i vektområdet 1,8-5 kg.

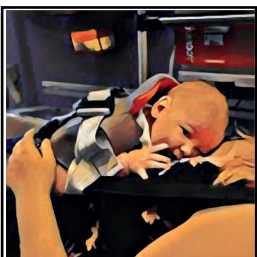

Art.Nr	GE15271000820
Høyde	5 cm
Bredde	23 cm
Lengde	33 cm
Vekt	1 kg
Maks kapasitet	5 kg
Sertifisering	CE, EN1789

Neo-Mate Infant Restraint

Neo-Mate Infant Restraint System, designet for pediatriske pasienter med en vekt mellom 2,3-6,4 kg, gir en rask og effektiv måte å sikre unge pasienter til nesten hvilken som helst ambulansbare uten å måtte kjøpe ekstra utstyr eller spesielle stoler. Neo-Mate er fullt justerbar med et fempunkts selesystem som komfortabelt sikrer pasienten under transport, og holder pasientens hode stabilt. Tre stropper fester enkelt Neo-Mate til enhver bære.



Art.Nr	5003050
Bredde	27 cm
Lengde	53 cm
Vekt	1,18 kg
Maks kapasitet	2,3-6,4 kg

Pedi-Mate Plus

PediMate®Plus er en nyhet!

PediMate®Plus gir en trygg transport av de minste barna og er designet for pediatrike pasienter mellom 4,5-45 kg. Et sikkerhetsbelte som er lett å håndtere for ambulansetransport. Utstyret rulles raskt ut om nødvendig og festes til ambulanserbåren med stropper. Med et justerbart fempunktsbelte er utstyret lett tilpasset barnets størrelse, og tar vekk behovet for å montere inn barneseter i ambulansen.

Art.Nr	5003055
Bredde	48 cm
Lengde	57 cm
Vekt	1,59 kg
Maks Kapasitet	45 kg
Sertifisering	CE





ITC Incubator Transport Interface

ITC (Incubator Transport Interface) grensesnittet er spesielt designet for sikker transport av kuvøser på flere av Fernos forskjellige ambulanserbårer. ITC-systemet består av en ramme og et sett med seks hurtigkoblinger samt 4 uttrekkbare håndtak.

ITC-grensesnittet har 2 tverrbjelker med 4 festepunkter for kuvøsen. Når kuvøsen er forankret til ITC-rammen i samsvar med kuvøseprodusentens retningslinjer, løftes den på plass og festes i de 6 hurtigkoblingene på ambulanserbåren for sikker transport. Testet og godkjent i henhold til EN 1789.

Art.Nr	F7000-ITCHLINX
Høyde	91,5 cm
Bredde	52 cm
Lengde	121 cm
Vekt	10 kg
Maks kapasitet	159 kg
Sertifisering	CE, EN1865

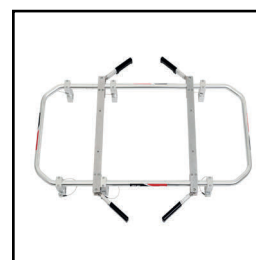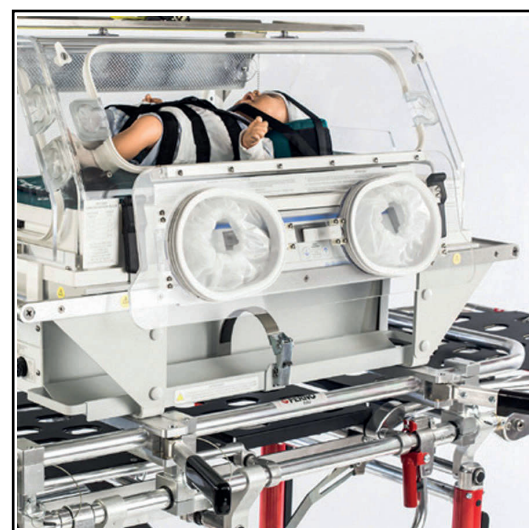

Ferno Scoop® EXL

SCOOP® EXL er uten tvil vårt mest populære immobiliseringsprodukt. Man kan både scoope pasienten i båret, samtidig som man sørger for immobilisering av pasienten. De ergonomiske håndtakene, med tydelig innfesting til pasientbelter gjør Scoop® EXL overlegen. Scoop® EXL kan brukes i røntgen, CT så vel som inne i MR-undersøkelserommet. Scoop bærer kan suppleres med tilbehør som X-spindel, samt hodestøtte. Scoop bærer kan utvides med extender kit TSL, fortsatt med samme lastekapasitet.



Art.Nr	F065EXL
Høyde	8 cm
Bredde	43 cm
Lengde	165-201 cm
Vekt	8 kg
Maks kapasitet	227 kg
Sertifisering	CE, EN1865

Extender kit TSL til Ferno Scoop

Ferno® Scoop® extender kit TSL er et nytt tilbehør for å utvide pasientoverflaten på en Scoop® EXL. Evnen til å utvide bredden på Scoop® EXL lar deg nå justere størrelsen på Scoop® EXL basert på pasientens fysiske størrelse. Med en sikker lastekapasitet på 227 kg og justerbar lengde, er Ferno Scoop® EXL nå i stand til å brukes på alle pasienter, gamle og unge og små og store. Enten utvider du bredden bare i hodeenden f.eks. for en pasient som er sterk på toppen eller veldig bredskuldret, eller du strekker deg også i fotenden for å få en generelt bredere liggende overflate. Klikk i vanlige låser, raskt og enkelt! Extenderkit fåes også kjøpt i singel lås. (Art nr F2500300003)



Art.Nr	F0832274
Høyde	3,5 cm
Bredde	3,5 cm
Lengde	13 cm
Vekt	490 g
Maks kapasitet	227 kg
Sertifisering	MDR

Vakuummadrass Easy Fix Plus II

EasyFix PLUS II har en unik design som gir økt støtte for hode, nakke og rygg uten bruk av nakkekrage på pasienten. Den unike designen letter også håndteringen av luftveiene til en pasient med begrenset mobilitet. Den øvre delen av EasyFix PLUS har en forsterket bunnplate som dekker hode, nakke og rygg. En unik løsning hvor madrassen sammen med festestropper gir bedre støtte enn tradisjonelle systemer. Utviklingen av dette systemet er basert på funksjonene til "spiderstropp" der det vises at kryssfiksering gir klare fordeler. Vakuummadrassen er i dag et ergonomisk hjelpemiddel for å flytte pasienter. Sammen med Step by Step kan du flytte pasienter opp til 250 kg på en komfortabel måte i trapper og på flat grunn til ambulansen.

Art.Nr GE23271511001

Høyde 4,5 cm

Bredde 130/72 cm

Lengde 208 cm

Vekt 8,7/11 kg

Maks kapasitet 250 kg

Sertifisering CE, EN1865



Vakuumsplintsett

Komplett sett med tre spjelker, fullt ben, arm/underben og arm. Et komplett sett består av spjelker, veske, pumpe og reparasjonssett. Skinnen danner seg rundt arm og ben og gir best mulig og komfortabel støtte. Slitesterkt PVC-stoff gjør skinnene holdbare og enkle å rengjøre. Alle sømmer er sveiset for best hygiene. Spjelkene holder vakuum i minst 15 timer og er røntgengjennomtrengelige. En tre års garanti gjelder produksjonsfeil og kvalitet.

Art.Nr GEAS190

Bredde 32 cm

Lengde 82 cm

Vekt 4,3 kg



EasyFix Plus vakuumsplintsett



EASYFIX Plus er våre nyeste vakuumspljelker, laget i Sverige, av høyeste kvalitet! Full benspljelk er den største spljelken, designet for god passform og rask påføring. Vakuumspljelker er ment å stabilisere og fikser brudd hos pasienter under transport.

Skinnene er designet med indre poser med kanalsystemer som holder granulat på plass. Nå har vi også forbedret hygiene med blant annet BioSafe-stropper som er lettere å holde rene.

Tre spljelker i settet; arm, underben og helben.

Komplett med veske, pumpe og reparasjonssett.

Slitesterkt PVC-stoff gjør skinnene holdbare og enkle å rengjøre.

BioSafe stropper for bedre hygiene.



Art.Nr GE272115000

Høyde 37 cm

Bredde 18 cm

Lengde 75 cm

Vekt 3,1 kg

Airlift ELK med pumpe

AIRLIFT ELK er en løftepute designet for å løfte/forflytte pasienter fra gulvet til stol, seng, opp i stående eller bære. Løfteputen blåses opp med en kompressor og en enkel håndkontroll. AIRLIFT ELK er enkel å bruke, krever svært lite trening og egner seg for bruk både innendørs og utendørs. Kan kun brukes av én pleier

Enkel å vedlikeholde, rengjør ganske enkelt med et ikke-slipende mildt flytende rengjørings-/desinfeksjonsmiddel. Materialet er designet for eksepsjonelt høye krav med ekstraordinær holdbarhet, styrke og ytelse i de tøffeste miljøer. Løfter pasienter som veier opptil 450 kg fra gulvet med bare ett trykk på en knapp.



Art.Nr 5005130

Høyde 56 cm

Bredde 57 cm

Lengde 50 cm

Vekt 3,6 kg

Maks kapasitet 450 kg

EasyGlide glidebrett 60 cm

EasyGlide er en genial liten oppfinnelse. Den hjelper til med forflytning fra rullestol til seng, toalett, bilsete og mange andre steder. Den er spesielt egnet for å utjevne høydeforskjeller eller for å "lage" bro over kortere avstander. Kantene på glidebrettet kan bøyes og er derfor enkle å plassere foran rullestolens hjul som beskyttelse mot smuss og andre ting. Den glatte toppen gjør det enkelt å bevege seg rundt mens sklisikker tape på undersiden betyr at den ikke glir bort når den beveger seg.

Art.Nr SWR131641

Høyde 0,6 cm

Bredde 33 cm

Lengde 60 cm

Vekt 1 kg

Maks kapasitet 136 kg

Sertifisering CE



Forflytningsbrett 114 cm Ferno

Fernos forflytningsbrett er et godt hjelpemiddel ved forflytning mellom ulike enheter som rullestol, seng og bære. Det glatte materialet gjør det lettere for pasienten å bevege seg over og det egner seg også for å utjevne høydeforskjeller eller "lage" bro over kortere avstander. Fernos forflytningsbrett er større enn våre andre forflytningsbrett og egner seg spesielt godt når du trenger forflytningsbrett i lengden eller når du skal flytte på de litt større pasientene. Det er veldig praktisk å bruke to forflytningsbrett når man forflytter en liggende pasient. Ett under bekkenet og ett under overkropp.

Med seks forskjellige håndtak får du enkelt grep om forflytningsbrettet.

Art.Nr F673

Høyde 0,6 cm

Bredd 46 cm


Lengde 114 cm

Vekt 2 kg

Sertifisering CE



Ferno Easy Handle 250 kg

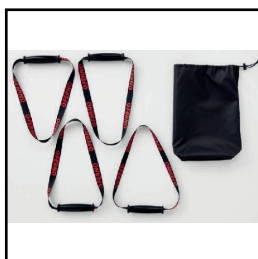

Ferno Easy Handle, den enkle løsningen som gjør den store forskjellen. Easy Handle er et ergonomisk hjelpemiddel som er ment å brukes når du løfter, minibårer, vakuummadrasser, scoop bårer, etc. Overalt hvor du trenger å få tilgang til litt bedre og få et mer ergonomisk grep. Easy Handle gir mulighet for mer ergonomisk løfting fra knehøyde. Ferno Easy håndtakssett har 4 deler med ergonomiske håndtak oppbevares i en praktisk og hendig pose.

Art.Nr GE15000000034

Lengde 40 cm

Vekt 0,45 kg

Maks kapasitet 250 kg

Evakueringsremmer Step by Step



Step by Step strap kit er et unikt ergonomisk hjelpemiddel som sammen med våre akutt- og vakuummadrasser gir deg en trygg, sikker og ergonomisk måte å flytte pasienter på. Tar liten plass og har lav vekt. Kan brukes på alle våre akuttmadrasser og vakuummadrasser. Forsterk stropene med justerbare håndtak for hode- og fotenden samt fire pasientbelter for festing.

Den nye versjonen gir økt fleksibilitet for både helsepersonell og pasienter. Nå kan du blant annet justere hode- og fotstroppe slik at den fungerer bedre basert på operatørens ulike lengde.

Art.Nr GE15000000117

Høyde 15 cm


Bredde 20 cm

Lengde 30 cm

Vekt 1,3 kg

Max kapasitet 250 kg

Sertifisering CE

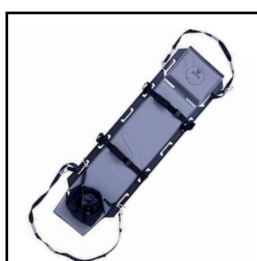

Easy Lift Skuldersele

Easylift skuldersele er et hjelpemiddel som avlaster hender og armer, og som flytter belastningen til de store muskelgrupper i ben og skuldre. Easylift er enkel å bruke. Den har friksjonslås som dels gir et fast grep og som samtidig sikrer at du raskt kan frigjøre deg om en uventet situasjon skulle oppstå.

Art.Nr GE15000000016

Vekt 0,4 kg



Belte forflytting Ferno Walkbelt

Ferno Walkbelt er et ergonomisk verktøy som festes på den skadde og gir personellet et solid håndtak for å holde og støtte den skadde ved forflytninger. 4 horisontale og 4 vertikale håndtak gir flere muligheter. Beltet kan vaskes i maskin for best hygiene.

Art.Nr FWEWBLS

Bredde 15 cm

Lengde 140 cm

Vekt 0,3 kg



Retmex® Rescue Standard



Retmex® Rescue Stretcher Standard 250kg er en praktisk redningsbære/redningsseil som tar liten plass.

For å sikre at du kan håndtere de kritiske situasjonene er seilet designet i førsteklasses materiale av høy kvalitet som tåler tøffe påkjenninger og samtidig er lett å holde ren. Med en svært kompakt lagring og en vekt på 900 g er Retmex® Rescue Stretcher Standard 250 kg lett og glatt uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet! Kan vaskes i 60 grader C. Retmex® Rescue Stretcher Standard er et utmerket produkt for redning ved PLIVO og for katastrofelager.

Art.Nr 5006063

Bredde 80 cm

Lengde 205 cm

Vekt 0,9 kg

Maks kapasitet 250 kg


Sertifisering CE

Retmex® Rescue Bariatrisk

Retmex® Rescue Stretcher Bariatrisk 385kg er en praktisk redningsbære som tar liten plass. Dette er en utmerket redningsbære som håndterer enhver situasjon. Ideell i ambulans- og utrykningskjøretøy.

Væskeavvisende overflate og komfortable håndtak pakket i en fleksibel pose. For å sikre at du tåler selv de kritiske situasjonene, er redningsbåren designet i førsteklasses materiale av høy kvalitet som tåler tøffe forhold stress og samtidig er lett å holde rent. Med en svært kompakt lagring og en vekt på 3 kg er Retmex® Rescue Stretcher Bariatrisk 385kg lett og glatt uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet!

Kan vaskes på 60 grader C.

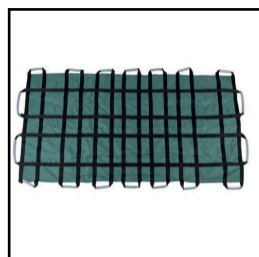

Art.Nr 5006062

Bredde 120 cm

Lengde 220 cm

Vekt 3 kg

Maks kapasitet 385 kg

Sertifisering CE

Evakueringsmadrass Bariatrisk

Ferno Transfer Mattress Bariatrisk er laget av PVC med 6 håndtak på hver side pluss evakueringshåndtak i hode- og fotenden av madrassen. Dette utstyret er spesielt designet for å støtte og hjelpe ambulanspersonell og redningsmannskap med overføring og frakt av svært tunge pasienter. Utviklet for å gli, og bære når nødvendig, pasienten fra seng, gulv eller lignende, over på bære og så fra bære til sykehusseng. Hovedformålet er å legge til rette frakt av pasient på en trygg og ergonomisk måte.

Art.Nr GE24271050000

Høyde 6 cm

Bredde 185 cm

Lengde 203 cm

Vekt 10,5 kg

Max kapasitet 380 kg

Sertifisering MDR 2017/745



Evakueringslaken Bariatrisk

Evakueringslaken bariatrisk er et kraftig hjelpemiddel som er designet for å brukes når du flytter de tynge pasientene. Det helsesede materialet og 20 håndtakene rundt åpner seg for fleksibilitet når folk skal flyttes i forskjellige miljøer. Dette gir betingelsene for en bedre ergonomisk måte å jobbe for brukere på. Ryggen består av en glidende overflate som reduserer friksjon når du trenger å trekke noen på gulvet.

Art.Nr GE23005000005

Høyde 1 cm

Bredde 143 cm

Lengde 205 cm


Vekt 4,3 kg

Maks kapasitet 380 kg

Sertifisering CE



Forflyttningslaken, engangs

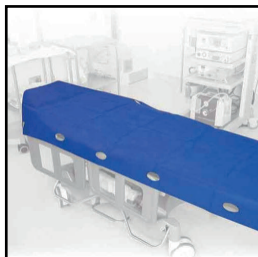

Flexislide er en pasientassistert bevegelseshjelp til engangsbruk, ideell for all lateral pasientbevegelse. Flexislide letter arbeid og reduserer risikoen for belastningsskader hos helsepersonell.

Tåler vekt opp til 415 kg under både tørre og våte forhold. Testet for brennbarhet i henhold til EN ISO12952-1:2010 og for foring i henhold til BS EN 13795:2011

+A1:2013

Tilgjengelig i to størrelser, standard (5006201) og bred (5006202)

Et veldig godt tilbehør til våre vakuummadrasser.

Art.Nr	5006201/ 5006202
Høyde	2 cm
Bredde	85/ 115 cm
Lengde	195 cm
Vekt	450 g
Maks kapasitet	415 kg
Sertifisering	CE

NOTATER

Øvelsesdrakt Bariatrisk Pasient

Denne tredelte treningsdressen lar deg enkelt øve på pasientbehandling av bariatriske pasienter. Siden du selv kan være «pasient» vil du oppleve hvilke utfordringer og begrensninger det kan være å bevege seg, sitte oppreist og andre hverdagslige bevegelser som du ellers tar for gitt. I ditt eget arbeidsmiljø får du muligheter til å øve på det som fungerer og hva du eventuelt må gjøre annerledes i håndteringen av den bariatriske pasienten.

Takket være at den faktiske vekten ikke er så stor, kan du trygt trene på ergonomiske teknikker uten å overbelaste deg fysisk under treningen. Myke bukser og genser er inkludert i settet.

Øve på pasientbehandling av bariatriske pasienter

Oppleve vansker som å ta på seg klær

3 deler; ben, arm og overkropp

Bukse og genser inkludert


Kan vaskes i maskin ved 30 grader

Materiale: 98 % polyester 2 % elastan

Art.Nr 5006065

Vekt 15 kg

Farge Brun/beige

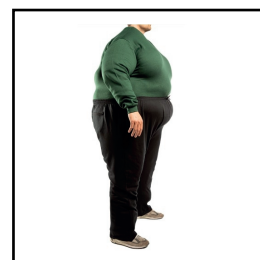

Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL

Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL gjør at en Scoop® EXL kan festes til en Ferno POWERX, iNX eller Mondial ambulansébåre. Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL gir et bredere pasientområde for transport av de litt større pasientene. Med noen få enkle detaljer forvandler du ambulansébåren din for å kunne håndtere tunge / bariatriske pasienter. Rask montering, noe som gjør en standard båre mer fleksibel med økt kapasitet.

Perfekt match med vår Ferno Transfer Heavy Duty madrass (GE24271050000)

Art.Nr FGB009008250


Høyde 5 cm (veske)

Bredde 24 cm (veske)

Lengde 63 cm (veske)

Vekt 6,8 kg

Sertifisering CE

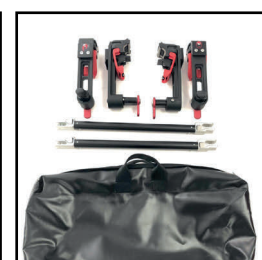



Vi i Ferno Norden har siden 1983 jobbet tett og utviklet samarbeid med våre kunder. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav til sikkerhet, kvalitet og funksjon. Våre primærkunder er ambulansetjenesten, redningstjenesten, politiet, sivilforsvaret og Forsvaret. I dag vokser vi også i industri, offentlige miljøer, helseinstitusjoner og det private markedet. Selskapet er ISO-sertifisert i miljø 14001:2015 og i kvalitet 9001:2015.

COUNTRY	PHONE	EMAIL	WEB
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi